



Seplatec SFC-250

Manuel d'utilisation



Mentions légales

Identification du produit :
Manuel d'utilisation (Original) Sepiatec SFC-250
11594448

Date de publication : 01.2023

Version A

BÜCHI Labortechnik AG
Meierseggstrasse 40
Postfach
CH-9230 Flawil 1
E-Mail : quality@buchi.com

BUCHI se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront jugées nécessaires à la lumière de l'expérience acquise, notamment en termes de structure, d'illustrations et de détails techniques. Ce manuel tombe sous la législation du droit d'auteur. Toute reproduction, distribution ou utilisation à des fins commerciales, mise à disposition à des tiers des informations qu'il contient est strictement interdite. Il est également interdit de fabriquer des composants, quels qu'ils soient, à l'appui de ce manuel, sans l'autorisation écrite préalable de BUCHI.

Table des matières

1	À propos de ce document	6
1.1	Mentions et symboles	6
1.2	Marques	6
1.3	Instruments connectés	6
2	Sécurité	7
2.1	Utilisation conforme	7
2.2	Utilisation autre que celle prévue	7
2.3	Qualification du personnel	7
2.4	Équipements de protection individuelle	8
2.5	Avertissements utilisés dans ce document	8
2.6	Symboles d'avertissement	8
2.7	Dangers résiduels	9
2.7.1	Dysfonctionnements	9
2.7.2	Surfaces très chaudes	9
2.7.3	Vapeurs dangereuses	9
2.7.4	Particules dangereuses	9
2.7.5	Bris de verre	9
2.7.6	Dysfonctionnement d'un instrument connecté (en option)	10
2.7.7	Contamination par maliciels due à des raccordements à d'autres équipements ou réseaux	10
2.8	Modifications	10
2.9	Étiquettes d'avertissement	10
3	Description du produit	13
3.1	Description fonctionnelle	13
3.2	Configuration	15
3.2.1	Vue de face	15
3.2.2	Connexions électriques et électroniques	17
3.2.3	Raccords de CO ₂ - et liquide de refroidissement	18
3.2.4	Raccords d'évacuation	18
3.3	Contenu de la livraison	19
3.4	Caractéristiques techniques	19
3.4.1	Sepiatec SFC-250	19
3.4.2	Conditions ambiantes	20
3.4.3	Solvants	20
3.4.4	Détecteurs	20
3.4.5	Pompes	20
4	Transport et stockage	22
4.1	Transport	22
4.2	Stockage	22
4.3	Levage de l'instrument	22
5	Mise en service	23
5.1	Lieu d'installation	23
5.2	Avant installation	25
5.3	Raccordements électriques	25

6	Logiciels	26
6.1	Introduction	26
6.1.1	Démarrage du logiciel	26
6.1.2	Entrée de valeur	26
6.1.3	Fermeture du logiciel	27
6.2	Mise en page	27
6.3	Onglet MANUAL	28
6.3.1	Rinçage de la tubulure et de la seringue	29
6.3.2	Démarrage de la pompe	30
6.3.3	Réglage du signal du détecteur sur zéro	31
6.3.4	Remplacement du module de recyclage du CO ₂	31
6.4	Onglet PARAMETER	31
6.4.1	Définition de nouvelles méthodes	33
6.4.2	Réglage du mode gradient	33
6.4.3	Chargement des méthodes enregistrées	35
6.4.4	Modification des méthodes enregistrées	35
6.5	Onglet COLLECTION	35
6.5.1	Réglage du contrôle de pics	40
6.5.2	Réglage de l'injection à étages	40
6.6	Onglet SYSTEM	41
6.6.1	Commande de la contre-pression	42
6.6.2	Commande de la vanne de CO ₂	42
6.6.3	Commande de la pompe de purge	43
6.7	Onglet RUN METHOD	44
6.7.1	Avant de lancer un cycle	45
6.8	Modifications au cours d'un cycle	46
6.8.1	Modification du nombre d'injections	46
6.8.2	Modifier les paramètres d'injection et de durée d'exécution	47
6.8.3	Modification du paramètre de fraction	48
6.9	Module de recyclage du CO ₂	49
7	Fonctionnement	53
7.1	Démarrage du système	53
7.2	Positionnement de l'échantillon	53
7.3	Positionnement des flacons de fractions	54
7.4	Sélection de la méthode	54
7.5	Lancement d'un cycle	55
7.6	Fin d'un cycle	56
7.7	Arrêt du système	56
7.8	Utilisation de l'interrupteur d'urgence	57
8	Nettoyage et entretien	58
8.1	Pompes	58
8.2	Entretien des vannes d'injection	58
8.3	Nettoyage de la cuve à circulation du détecteur UV	58
8.4	Soupape du régulateur de contre-pression	58
8.5	Vanne de fractionnement	58
8.5.1	Nettoyage de la vanne et remplacement du rotor	58
8.5.2	Démontage	59
8.5.3	Assemblage	59
8.6	Séparateurs gaz-liquide (SGL)	60

9	Dépannage	62
9.1	Dépannage	62
10	Mise hors service et élimination	63
10.1	Mise hors service.....	63
10.2	Élimination	63
10.3	Renvoi de l'instrument	63
11	Annexe	64
11.1	Pièces de rechange et accessoires.....	64

1 À propos de ce document

Le présent manuel d'utilisation s'applique à toutes les variantes de l'instrument. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'instrument et suivez les instructions pour assurer un fonctionnement sûr et sans faille.

Conservez ce manuel d'utilisation à des fins de référence ultérieure et transmettez-le à tout utilisateur ou propriétaire successeur.

BÜCHI Labortechnik AG n'assume aucune responsabilité pour les éventuels dommages, défauts et dysfonctionnements résultant de la non-observation du présent manuel d'utilisation.

S'il vous reste des questions après avoir lu ce manuel d'utilisation :

► Contactez BÜCHI Labortechnik AG Customer Service.

<https://www.buchi.com/contact>

1.1 Mentions et symboles



REMARQUE

Ce symbole signale des informations utiles et importantes.

- ☑ Ce pictogramme indique une condition devant être remplie avant de poursuivre.
- Ce pictogramme indique une instruction devant être exécutée par l'opérateur.
- ⇒ Ce pictogramme indique le résultat d'une instruction correctement exécutée.

Mentions	Explication
<i>Fenêtre</i>	Les fenêtres du logiciel sont indiquées ainsi.
<i>Onglets</i>	Les boîtes de dialogue sont indiquées ainsi.
<i>Boîtes de dialogue</i>	Les boîtes de dialogue sont indiquées ainsi.
<i>[Boutons du programme]</i>	Les boutons de commande sont marqués ainsi.
<i>[Noms de champ]</i>	Les noms de champ sont marqués ainsi.
<i>[Menus / Points de menu]</i>	Les menus / points de menu sont marqués ainsi.
Affichages d'état	Les affichages d'état sont marqués ainsi.
Messages	Les messages sont indiqués ainsi.

1.2 Marques

Les noms de produits et toutes les marques déposées ou non déposées mentionnés dans ce document sont seulement utilisés à des fins d'identification et restent la propriété exclusive des détenteurs respectifs.

1.3 Instruments connectés

Outre ce manuel d'utilisation, suivre les instructions et les spécifications figurant dans la documentation des instruments connectés.

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'instrument est conçu pour la chromatographie en phase supercritique (SFC, Super Fluid Chromatography).

L'instrument peut être utilisé en laboratoire dans le cadre des tâches suivantes :

- Purification
- Séparation d'un ou plusieurs composés d'un mélange

2.2 Utilisation autre que celle prévue

Toute utilisation autre que celle décrite au Chapitre 2.1 "Utilisation conforme", page 7 et toute application non conforme aux caractéristiques techniques (consulter le Caractéristiques techniques) constitue une utilisation autre que celle prévue. En particulier, les utilisations suivantes ne sont pas autorisées :

- Utilisation de l'instrument dans des zones nécessitant des équipements à l'épreuve des explosions.
- Utilisation de l'instrument avec des solvants contenant des peroxydes.

2.3 Qualification du personnel

Le personnel non qualifié n'est pas en mesure de reconnaître les risques et se trouve ainsi exposé à des dangers accrus.

L'utilisation de l'instrument est réservée au personnel de laboratoire dûment qualifié.

Ce manuel d'utilisation s'adresse aux publics suivants :

Utilisateurs

Les utilisateurs sont les personnes qui correspondent aux critères suivants :

- Ils ont été initiés à l'utilisation de l'instrument.
- Ils ont pris connaissance du contenu de ce manuel d'utilisation ainsi que des consignes de sécurité en vigueur et les appliquent.
- Grâce à leur formation et à leur expérience professionnelle, ils sont en mesure d'évaluer les risques associés à l'utilisation de l'instrument.

Opérateur

L'opérateur (généralement le responsable du laboratoire) est responsable des points suivants :

- L'instrument doit être dûment installé, mis en service, utilisé et entretenu.
- Seul un personnel suffisamment qualifié peut être chargé d'effectuer les tâches décrites dans le présent manuel d'utilisation.
- Le personnel doit respecter les exigences et réglementations locales en vigueur et travailler dans le respect des mesures de sécurité en tenant compte des risques.
- Tout incident impliquant la sécurité qui surviendrait pendant l'utilisation de l'instrument doit être signalé au fabricant (quality@buchi.com).

Techniciens de service BUCHI

Les techniciens de service agréés par BUCHI ont suivi des formations spécifiques et sont autorisés par BÜCHI Labortechnik AG à réaliser des interventions d'entretien et de réparation spéciales.

2.4 Équipements de protection individuelle

Selon l'application, des dangers peuvent être provoqués sous l'effet de la chaleur ou de substances chimiques agressives.

- ▶ Portez toujours des équipements de protection individuelle (lunettes de protection, vêtements de protection, gants de protection).
- ▶ Assurez-vous que les équipements de protection individuelle satisfont aux exigences des fiches de sécurité (MSDS) relatives aux substances chimiques utilisées.

2.5 Avertissements utilisés dans ce document

Les avertissements vous signalent les dangers pouvant survenir lors de la manipulation de l'instrument. Il existe quatre niveaux de danger, chacun identifiable par le mot-indicateur utilisé.

Mot-indicateur Signification

DANGER	Indique un danger impliquant un niveau de risque élevé pouvant entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.
AVERTISSE- MENT	Indique un danger impliquant un niveau de risque moyen pouvant entraîner la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.
ATTENTION	Indique un danger impliquant un faible niveau de risque pouvant entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne s'il n'est pas évité.
REMARQUE	Indique un danger pouvant entraîner des dommages matériels.

2.6 Symboles d'avertissement

Les symboles d'avertissement suivants sont affichés dans le présent manuel d'utilisation ou sur l'instrument.

Symbole Signification



Avertissement général



Dommages causés à l'instrument



Tension électrique dangereuse



Surface brûlante

2.7 Dangers résiduels

L'instrument a été développé et fabriqué en utilisant les dernières avancées technologiques. Néanmoins, des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement peuvent survenir si l'instrument est utilisé de manière incorrecte. Des avertissements appropriés dans ce manuel signalent à l'utilisateur ces dangers résiduels.

2.7.1 Dysfonctionnements

Si un instrument est endommagé, des bords coupants, des éclats de verre, des pièces mobiles ou des fils électriques exposés peuvent entraîner des blessures.

- ▶ Vérifier régulièrement l'instrument afin de détecter tout dommage visible.
- ▶ En cas de panne, éteindre immédiatement l'instrument, débrancher le cordon d'alimentation et informer l'opérateur.
- ▶ Cesser d'utiliser les instruments qui sont endommagés.

2.7.2 Surfaces très chaudes

La zone du four à colonne et les éléments de chauffe de l'appareil peuvent devenir chauds. En cas de contact, ils peuvent provoquer des brûlures cutanées.

- ▶ Ne pas toucher les surfaces chaudes ou sinon porter des gants de protection appropriés.

2.7.3 Vapeurs dangereuses

L'utilisation de l'instrument peut produire des vapeurs dangereuses susceptibles d'avoir des effets toxiques potentiellement mortels.

- ▶ Ne pas inhaler les vapeurs émises pendant le traitement.
- ▶ Veiller à évacuer les vapeurs au moyen d'une hotte aspirante adaptée.
- ▶ Utiliser l'instrument uniquement dans des zones bien ventilées.
- ▶ Si des vapeurs s'échappent des raccords, vérifier les bagues sur les raccords correspondants et les remplacer si nécessaire.
- ▶ Ne pas traiter de liquide inconnu.
- ▶ Quelle que soit la substance utilisée, respecter les indications des fiches de données de sécurité.

2.7.4 Particules dangereuses

L'utilisation de l'instrument peut produire des particules dangereuses susceptibles d'avoir des effets toxiques potentiellement mortels.

- ▶ Ne pas inhaler les particules émises pendant le traitement.
- ▶ Veiller à évacuer les particules au moyen d'une hotte aspirante adaptée.
- ▶ Utiliser l'instrument uniquement dans des zones bien ventilées.
- ▶ Si des particules s'échappent des raccords, vérifier les bagues des raccords correspondants et les remplacer si nécessaire.
- ▶ Ne pas traiter de liquides ni de mélanges de solvants inconnus.
- ▶ Quelle que soit la substance utilisée, respecter les indications des fiches de données de sécurité.

2.7.5 Bris de verre

Les bris de verre peuvent provoquer de graves coupures.

Les composants en verre endommagés peuvent imploser s'ils sont soumis à une pression élevée.

Des dommages mineurs sur les joints rodés réduisent l'effet d'étanchéité et peuvent donc diminuer les performances.

- ▶ Manipuler avec précaution le flacon et les autres composants en verre, en veillant à ne jamais les laisser tomber.
- ▶ À chaque utilisation, toujours inspecter visuellement les composants en verre afin de détecter d'éventuels dommages.
- ▶ Cesser d'utiliser les composants en verre qui sont endommagés.
- ▶ Toujours porter des gants de protection lors de l'élimination de morceaux de verre.

2.7.6 Dysfonctionnement d'un instrument connecté (en option)

Un dysfonctionnement sur un instrument connecté peut entraîner un empoisonnement ou la mort.

- ▶ S'assurer que l'instrument connecté est préparé et entretenu conformément à la documentation utilisateur.

2.7.7 Contamination par maliciels due à des raccordements à d'autres équipements ou réseaux

Les raccordements à d'autres équipements ou à un réseau peuvent engendrer une contamination de l'instrument par un logiciel malveillant.

- ▶ Installez un logiciel antivirus ainsi qu'un pare-feu sur l'instrument avant de le connecter à d'autres équipements ou réseaux.

2.8 Modifications

Les modifications non autorisées peuvent affecter la sécurité et entraîner des accidents.

- ▶ Utiliser exclusivement des accessoires, des pièces de rechange et des consommables BUCHI d'origine.
- ▶ Effectuer des modifications techniques uniquement avec l'accord écrit préalable de BUCHI.
- ▶ N'autoriser les modifications que par les techniciens de service BUCHI.

BUCHI décline toute responsabilité pour les dommages, défauts et dysfonctionnements résultant de modifications non autorisées.

2.9 Étiquettes d'avertissement



 **DANGER**

Risque de choc électrique

Risque de mort par électrocution

- ▶ Ne jamais retirer le boîtier.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'instrument si le boîtier a été retiré ou sans les pompes incluses.
- ▶ Ne jamais utiliser de connexions électriques ou de câbles qui n'ont pas été fournis avec l'instrument.

**DANGER****Risque de brûlures par le froid**

Les gaz sous pression peuvent générer de basses températures lors de la dépressurisation.

- ▶ Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité, des vêtements et des gants de protection.

**DANGER****Surface chaude**

Le four à colonne peut atteindre des températures allant jusqu'à 70 °C. Le chauffage peut chauffer pendant un certain temps même après la coupure de l'alimentation, en raison de l'énergie stockée en interne.

- ▶ Ouvrir la porte avec précaution afin que l'air chaud puisse s'évacuer.
- ▶ Changer les colonnes uniquement après le refroidissement complet.
- ▶ Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité, des vêtements et des gants de protection.
- ▶ Vérifier que les fentes d'aération et l'élément chauffant du four ne sont pas couverts.

**AVERTISSEMENT****Gaz sous pression**

L'instrument de commande est sous pression. L'évacuation des gaz et solvants sous pression est possible. Le CO₂ est suffocant à des concentrations élevées.

- ▶ Installer des détecteurs de gaz sur le site.
- ▶ Créer une ventilation suffisante.



PRUDENCE

Risque dû à la chute d'objets ou de matériaux

Blessures corporelles ou dommages matériels

- ▶ Ne jamais placer de flacons de solvant ou d'autres éléments sur le dessus de l'instrument.



REMARQUE

Les pompes s'éteignent automatiquement lorsque la pression atteint 400 bars.

La cuve à circulation du détecteur est stable jusqu'à une pression de 300 bars. Pour éviter d'endommager la cuve à circulation, le régulateur de pression contre-pression est programmé pour s'éteindre à 300 bars.



REMARQUE

Le système peut être sous pression après la mise hors tension.

Ne pas oublier que les gaz et les solvants sous pression peuvent s'échapper.

3 Description du produit


3.1 Description fonctionnelle

L'instrument est destiné aux séparations préparatives sur petites colonnes au moyen de la chromatographie en phase supercritique (SCF, Supercritical Fluid Chromatography).

- La chromatographie en phase supercritique permet de séparer les échantillons de la taille des grammes.
- Les séparateurs gaz-liquide (SGL) intégrés permettent d'éliminer rapidement et efficacement le CO₂ des composants séparés.

L'instrument permet :

- le mélange de CO₂ supercritique et d'un solvant.
Avec le sélecteur de solvant en option, il est possible de choisir le solvant parmi quatre solvants différents ;
- l'injection d'un échantillon liquide ou solide ;
- la séparation sur une colonne ;
- la détection des composants à l'aide d'un détecteur UV, DEDL ou MS ;
- la collecte des fractions souhaitées.

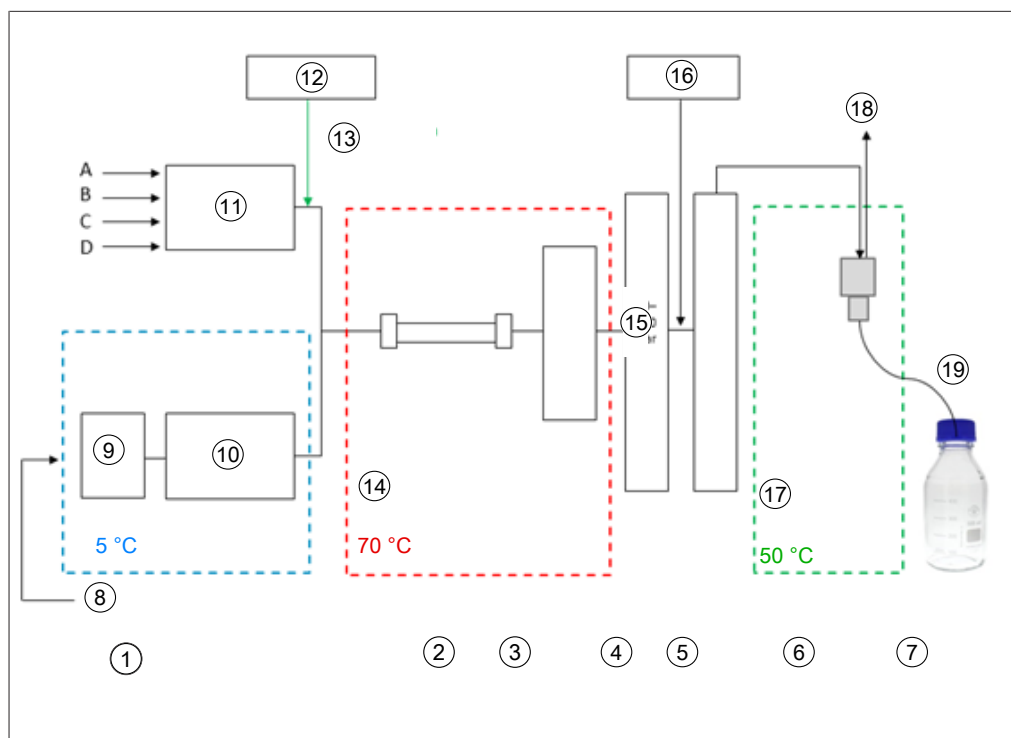

- | | |
|---|--|
| 1 Pompes | 2 Four à colonne |
| 3 Détecteur, cuve à circulation | 4 Régulateur de contre-pression |
| 5 Post-chauffage | 6 Séparateur gaz-liquide |
| 7 Fractions (8 pièces) | 8 CO ₂ liquide 60-75 bars |
| 9 Prérefroidissement | 10 Pompe de CO ₂ |
| 11 Pompe du modificateur | 12 Échantillon |
| 13 Injection du flux du modificateur | 14 CO ₂ supercritique 80-250 bars |
| 15 Valeur de pression BPR 80-250 bars | 16 Pompe complémentaire |
| 17 Basse pression | 18 Évacuation du CO ₂ |
| 19 Collecte de fractions dépressurisées | |

La phase mobile de la chromatographie en phase supercritique se compose d'un fluide supercritique et d'un solvant liquide. Ce liquide est un gaz condensé au-dessus de la température et de la pression critiques. Ses propriétés sont celles d'un gaz et d'un liquide. Le dioxyde de carbone (CO₂) est principalement utilisé.


Le CO₂ est transporté par la pompe à l'état refroidi. Le fluide est chauffé au-dessus de la température supercritique dans le four à colonne et mélangé au modificateur. Le régulateur de contre-pression maintient une pression élevée pour que la phase mobile reste au-dessus du point critique de CO₂. L'échantillon est ensuite transporté au-dessus de la colonne de séparation par le fluide supercritique. Un modificateur peut être ajouté pour améliorer l'élution des substances organiques.

Après détection, le CO₂ est séparé des substances éluées. La position de la vanne de détection et de fraction détermine dans quel SGL se dirige le flux. Le SGL sépare la majorité du CO₂ et l'élimine du système par un tuyau d'échappement et l'introduit dans le système de ventilation.

Les fractions collectées contiennent les substances dissoutes dans le modificateur et une petite quantité de CO₂ résiduaire et, en option, dans la solution organique de la pompe complémentaire. Les fractions sont disponibles sous forme hautement concentrée pour une analyse plus approfondie.

3.2 Configuration

3.2.1 Vue de face

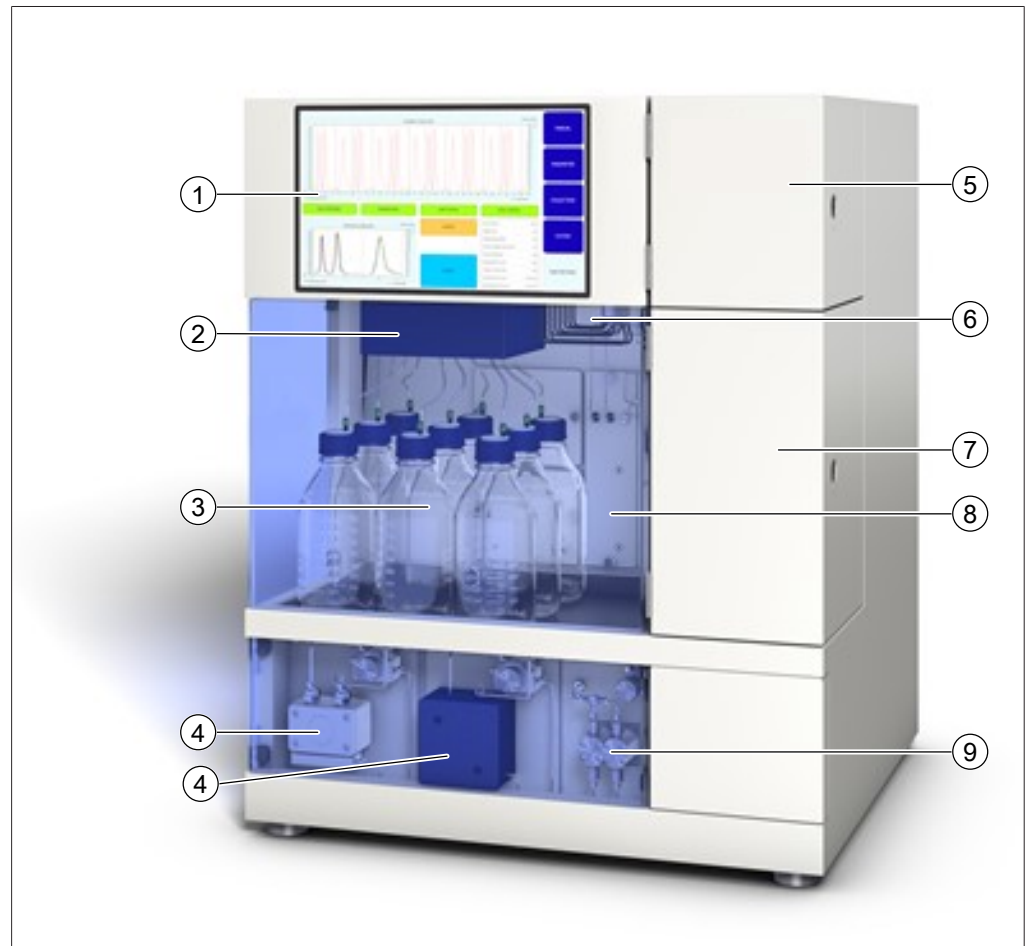


- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Écran tactile | 2 | Séparateur gaz-liquide |
| 3 | Flacons de fractions | 4 | Pompe du CO ₂ et du modificateur |
| 5 | Volet du détecteur | 6 | Vanne du collecteur de fractions |
| 7 | Four à colonne | 8 | Couvercle du régulateur de contre-pression |
| 9 | Pompe complémentaire (en option) | | |

Four à colonne



- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | Cuve à circulation avec câble à fibres | 2 | Détecteur de fuite optiques |
| 3 | Vanne d'injection | 4 | Sélecteur de colonne |
| 5 | Module de chauffage | 6 | Filtre |
| 7 | Clapets antiretour | 8 | Support de colonne |

3.2.2 Connexions électriques et électroniques

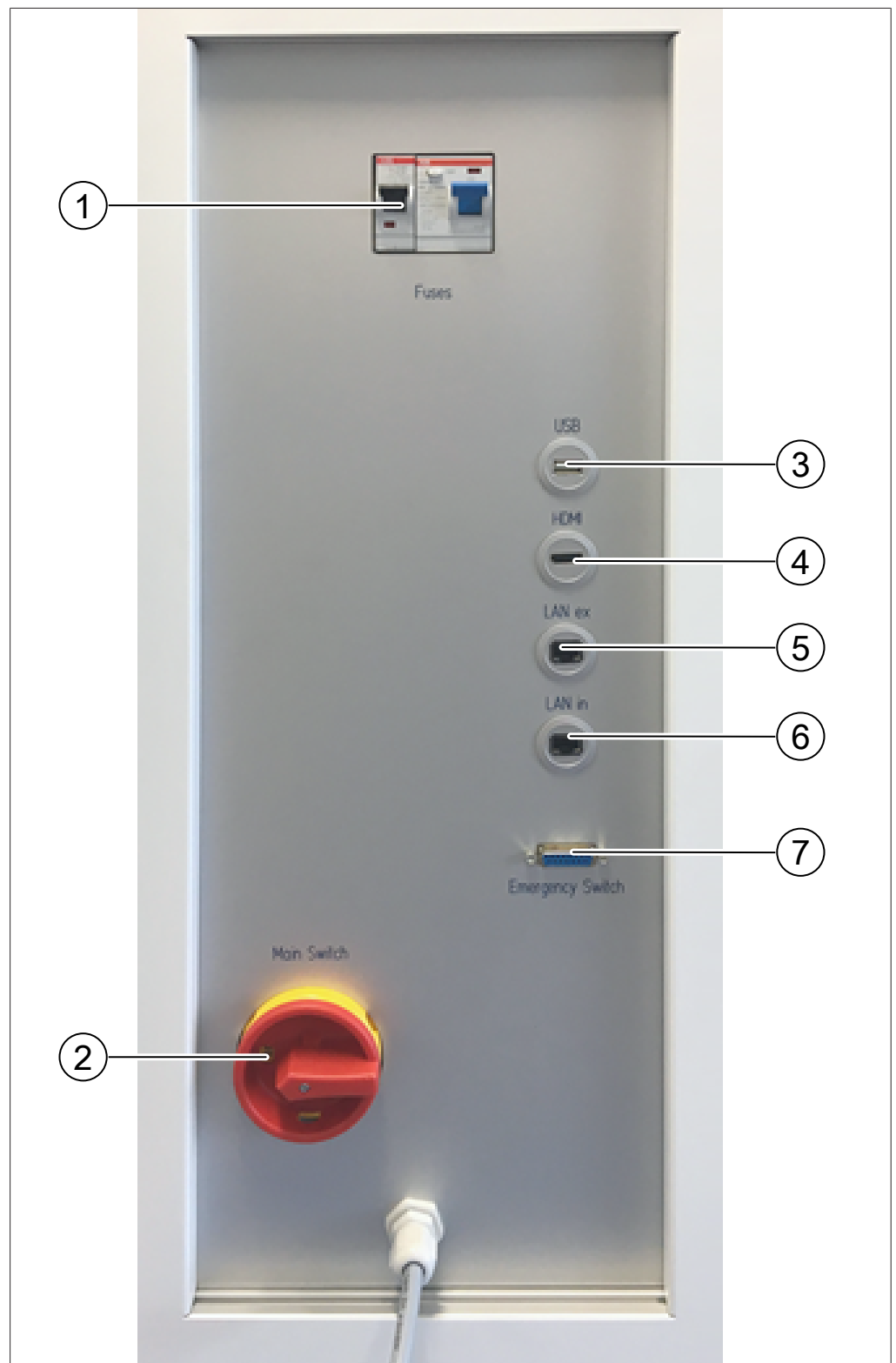

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Fusibles et disjoncteur FI | 2 | Interrupteur principal |
| 3 | Connecteur USB | 4 | Connecteur HDMI |
| 5 | Connexion externe LAN | 6 | Connexion interne LAN |
| 7 | Connexion de l'interrupteur d'urgence | | |

3.2.3 Raccords de CO₂- et liquide de refroidissement



- 1 Raccord d'alimentation en eau de refroidissement
1 Raccord d'alimentation en CO₂
2 Soupape de sécurité de sortie CO₂
3 Raccord d'alimentation en CO₂

3.2.4 Raccords d'évacuation

Cet instrument est équipé de trois raccords d'évacuation :

- à gauche se trouve l'évacuation du compartiment de fractionnement ;
- à droite se trouve la sortie de la soupape d'évacuation de sécurité du CO₂ ;
- à l'arrière se trouve l'évacuation en CO₂ du SGL.

3.3 Contenu de la livraison



REMARQUE

Le contenu de la livraison dépend de la configuration du bon de commande.

Les accessoires sont livrés conformément au bon de commande, à la confirmation de commande et au bon de livraison.

3.4 Caractéristiques techniques

3.4.1 Sepiatec SFC-250

Dimensions (L x P x H)	720 mm × 600 mm × 880 mm
Poids	130 kg
Consommation électrique	Max. 1 300 W
Tension d'alimentation	Europe : 230 Vca ± 10 % Asie : 230 Vca ± 10 % États-Unis : 120 Vca ± 10 %
Fréquence	50 / 60 Hz
Fusible	15 A
Catégorie de surtension	II
Code IP	IP 20
Degré de pollution	2
Dégagement minimal de chaque côté	200 mm
Dispositif de commande	Écran tactile 15,6 pouces, format 16:9
Système	Windows 10 intégré
Logiciel de commande	Logiciel de commande de SFC préparative
Plage de températures de fonctionnement	15-25 °C
Pression de service	300 bars max.
Vanne d'injection	Vanne 6 ports/2 voies à commande électrique
Vanne de sélection de colonne	Vannes 11 ports/10 voies à commande électrique
Soupape du régulateur de contre-pression	Clapet antiretour électromagnétique
Vanne de fractionnement	Vanne 11 ports/10 voies à commande électrique
Tuyaux	Tubes capillaires en acier inoxydable DE : 1/16 po - DI : 1,0 mm ou 0,5 mm ou 0,25 mm
Contrôle de la température de la tête de pompe	Refroidisseur

Développement de méthodes	Sur les colonnes analytiques (DI : 4-4,6 mm)
Dimension de la colonne	DI : 4-16 mm
Longueur de la colonne	Max. 250 mm
Température du four à colonne	Température ambiante à 70 °C
Capacité de colonne standard	2
Capacité de colonne maximale	8 (en option)
Nombre de collecte de fractions	1-8 pièces
Volumes	illimités
Collecte sans pression	Standard
Taille de la seringue	1,0 mL Autres volumes sur demande
Boucle	0,5 mL
Injection à étages	Standard
Certificat	CSA / CE

3.4.2 Conditions ambiantes

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer	2 000 m
Température ambiante et de stockage	15-25 °C
Humidité relative maximale	45-75 % (sans condensation)

3.4.3 Solvants

CO ₂	Liquide
Solvants organiques modificateurs	4 pièces Uniquement avec le sélecteur de solvant en option.

3.4.4 Détecteurs

Plage de longueurs d'onde des UV	190-500 nm
Longueurs d'onde UV sélectionnables	1
DAD	En option
DEDL	En option
MS	En option

3.4.5 Pompes

Pompe de CO ₂ Débit	150 mL/min
Pompe de CO ₂ Pression	400 bars max.
Pompe du modificateur	2 pièces

Pompe du modificateur Débit	30 mL/min
Pompe du modificateur Pression	400 bars max.
Pompe complémentaire	En option
Précision du débit	± 2 % à 2-50 % de la plage de débit avec le méthanol (eau 80/20 vol/vol)
Précision	0,25 % de 1 mL/min à 20 mL/min à 20 °C

4 Transport et stockage

4.1 Transport



ATTENTION

Risque de rupture en cas de transport incorrect

- ▶ S'assurer que l'instrument est totalement démonté.
- ▶ Emballer correctement tous les composants de l'instrument pour éviter qu'ils ne se cassent. Utiliser l'emballage d'origine dans la mesure du possible.
- ▶ Éviter les mouvements brusques pendant le transport.

- ▶ Après le transport, vérifier que l'instrument et tous les composants en verre ne sont pas endommagés.
- ▶ Les dommages survenus pendant le transport doivent être signalés au transporteur.
- ▶ Conserver l'emballage pour tout transport ultérieur.

4.2 Stockage

- ▶ Assurez-vous que les conditions ambiantes sont respectées (voir Chapitre 3.4 "Caractéristiques techniques", page 19).
- ▶ Dans la mesure du possible, stockez dans l'emballage d'origine.
- ▶ Après stockage de l'appareil, contrôlez toutes les parties en verre ainsi que les bagues d'étanchéité et les tuyaux afin de détecter d'éventuels endommagements, et remplacez si nécessaire.

4.3 Levage de l'instrument



AVERTISSEMENT

Danger à cause d'un transport incorrect

Les conséquences possibles sont des blessures par écrasement, coupures et fractures.

- ▶ L'instrument doit être transporté par deux personnes en même temps.
 - ▶ Lever l'instrument par les points indiqués.
-
- ▶ Soulever l'instrument – cette opération nécessite deux personnes, chacune d'elles levant l'instrument à l'un des endroits indiqués au bas de l'instrument.

5 Mise en service

5.1 Lieu d'installation

**REMARQUE**

Ne jamais déballer la marchandise, sauf accord exprès.

**REMARQUE**

Assurez-vous que l'alimentation électrique peut être débranchée à n'importe quel moment en cas d'urgence.

Un technicien de maintenance BUCHI ou un représentant agréé déballera et vérifiera soigneusement la livraison pour s'assurer que tous les modules et accessoires sont en bon état. Cette opération doit être effectuée avant l'installation.

Le site d'installation doit respecter les exigences suivantes :

- Surface ferme et plane.
- Tenez compte des dimensions maximales et du poids de l'équipement. Voir Chapitre 3.4 "Caractéristiques techniques", page 19
- L'espace libre de part et d'autre de l'instrument doit être d'au moins 200 mm.
- N'exposez pas l'instrument à des charges thermiques externes telles qu'au rayonnement solaire direct.
- N'exposez pas l'instrument à des émissions électromagnétiques accrues. Les champs électromagnétiques dans la plage de fréquence comprise entre 200 à 300 MHz peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'instrument.
- Assurez-vous que le lieu d'installation satisfait aux exigences des fiches de sécurité relatives à l'ensemble des solvants et échantillons utilisés.
- Il est recommandé d'installer l'instrument dans une hotte qui élimine les vapeurs de solvant et les gaz directement à proximité (échange d'air minimum de 200 m³/heure).
- L'instrument est conçu pour être utilisé sur une paillasse de laboratoire. L'instrument peut être raccordé à un système de ventilation par la buse de connexion du côté gauche.
- Le diamètre intérieur de la conduite d'évacuation pour le gaz carbonique (CO₂) résiduaire doit être d'au moins 10 mm.
- L'instrument doit se trouver à au moins 200 mm des murs adjacents ou d'autres instruments. La distance à l'arrière doit être d'au moins 100 mm. Cela garantit une ventilation adéquate et un accès libre à l'interrupteur principal et aux fusibles.
- Mettre à disposition un refroidisseur externe pour maintenir la tête de pompe de CO₂ à une température constante d'environ 10 °C indépendamment de la température ambiante. Capacité de refroidissement requise (éthanol) 0,26 kW, raccordement : G1/4 pouce ou G1/8 pouce.
- La ligne d'alimentation doit être exempte d'interférences électromagnétiques (IEM) et mise à la terre. L'appareil ne doit pas être raccordé à un système d'alimentation qui est vulnérable aux variations soudaines de demande d'alimentation. En cas de fluctuations importantes de la tension, un transformateur à tension constante peut être nécessaire.
- Alimentation en CO₂ liquide, pression 60-75 bars.
- Connecteur 1/8 pouce (Swagelok)
- Une alarme CO₂ doit être configurée sur le site pour alerter en cas de niveaux élevés de CO₂ dans l'air.
- L'interrupteur d'urgence associé, qui doit être installé de façon à être accessible à l'utilisateur et à l'extérieur de la hotte. Il est utilisé pour couper les pompes, les éléments de chauffe et l'alimentation en CO₂ en cas de danger.
- Pour permettre le fonctionnement d'un spectromètre de masse, le lieu de travail doit être équipé d'une alimentation en azote (alimentation de laboratoire, générateur ou bouteille d'azote).

5.2 Avant installation



ATTENTION

Endommagement de l'instrument à cause d'une mise en marche prématurée.

Ne pas mettre en marche l'instrument prématurément après le transport au risque de l'endommager.

- ▶ Après le transport, attendre que l'instrument prenne la température ambiante.

5.3 Raccordements électriques



ATTENTION

Risque d'endommagement de l'instrument si des câbles d'alimentation non compatibles sont utilisés.

L'usage de câbles d'alimentation non compatibles peut altérer les performances de l'instrument ou l'endommager.

- ▶ Utilisez uniquement des câbles d'alimentation BUCHI.

Condition requise :

- L'installation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique.
 - L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif de mise à la terre approprié.
 - L'installation électrique doit être équipée de fusibles et de dispositifs de sécurité électrique appropriés.
 - Le lieu d'installation doit être conforme aux spécifications techniques. Voir Chapitre 3.4 "Caractéristiques techniques", page 19.
- ▶ Brancher la fiche secteur sur une prise secteur dédiée.

6 Logiciels

6.1 Introduction


L'instrument est contrôlé par le logiciel de commande de la SFC préparative. Le logiciel est commandé par l'écran tactile intégré. Toutes les informations nécessaires pour un cycle de séparation correct (paramètres de séparation, paramètres système, conditions de fractionnement) sont sélectionnées au moyen de ce logiciel.

Tous les paramètres sont saisis en appuyant sur la zone de visualisation correspondante. Une boîte de dialogue s'ouvre pour saisir et modifier les données. Pour confirmer les données, appuyer sur le bouton [OK]. La boîte de dialogue se ferme automatiquement et les données sont visibles dans la zone de visualisation. Toutes les zones de visualisation sont indiquées dans ce manuel d'utilisation. Selon la configuration, les zones de visualisation apparaissent en gris. Ces zones de visualisation grisées sont inactives ou non incluses.

6.1.1 Démarrage du logiciel

Condition requise :

- L'instrument est sous tension.
- ▶ Appuyer sur le symbole [Prep SFC] sur l'écran tactile pour lancer le logiciel.
- ⇒ La fenêtre Démarrer s'ouvre.

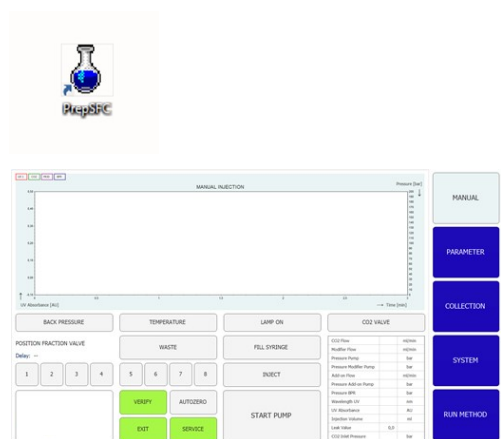


- ▶ Appuyer sur le bouton [VERIFY].
- ⇒ Le système vérifie si tous les éléments fonctionnels répondent correctement.

6.1.2 Entrée de valeur

Saisir des chiffres

- ▶ Appuyer sur un champ de saisie.
- ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie numérique.

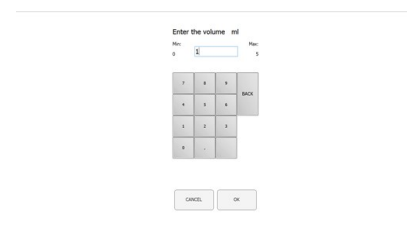

- ▶ Saisir la valeur.

- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour confirmer.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
- ▶ Appuyer sur le bouton [CANCEL] pour quitter la boîte de dialogue sans modifier les valeurs.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

Saisir des noms

- ▶ Appuyer sur un champ de saisie.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie numérique.
- ▶ Saisir la valeur.
- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour confirmer.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

6.1.3 Fermeture du logiciel

Condition requise :

- Le cycle est terminé.
- Les pompes sont désactivées.
- ▶ Appuyer sur le bouton [EXIT] pour quitter le logiciel.
 - ⇒ Le logiciel de commande de la SFC préparative se ferme.



6.2 Mise en page



N°	Nom	Description
1	Écran <i>Chromatogram</i>	Pour afficher les valeurs mesurées.

N°	Nom	Description
2	Onglet <i>MANUAL</i>	Pour démarrer et arrêter un cycle manuellement. Voir Onglet <i>MANUAL</i> .
3	Onglet <i>PARAMETER</i>	Pour définir, charger et modifier le paramètre. Voir Onglet <i>PARAMETER</i> .
4	Onglet <i>COLLECTION</i>	Pour configurer les conditions de fractionnement, le nombre de pics à collecter et la méthode de fractionnement. Voir Onglet <i>COLLECTION</i> .
5	Onglet <i>SYSTEM</i>	Pour configurer les paramètres du système. Les paramètres du système sont définis dans cette fenêtre. Ils ne dépendent pas de la méthode chargée et peuvent être réglés individuellement pour chaque cycle. Voir Onglet <i>SYSTEM</i> .
6	Onglet <i>RUN METHOD</i>	Pour démarrer une méthode chargée et l'afficher en ligne. Cette fenêtre est utilisée pour démarrer le cycle en cours, qui peut être surveillé en ligne. Voir Onglet <i>RUN METHOD</i> .
7	Bouton [<i>VERIFY</i>]	Pour vérifier si tous les éléments fonctionnels répondent correctement.
8	Bouton [<i>EXIT</i>]	Pour quitter le logiciel de commande.
9	Bouton [<i>SERVICE</i>]	Pour ouvrir les paramètres d'entretien du système.
10	Bouton [<i>Windows</i>]	Pour quitter le logiciel de commande. Ouvre l'écran d'accueil de Windows.

6.3 Onglet *MANUAL*



N°	Nom	Description
1	Onglet <i>MANUAL</i>	Pour démarrer et arrêter un cycle manuellement.
2	Bouton [<i>FILL SYRINGE</i>]	Pour rincer la tubulure vers la seringue.
3	Bouton [<i>SERVICE</i>]	Pour ouvrir les paramètres d'entretien du système. Les paramètres, les signaux des capteurs et les positions des vannes du module de recyclage s'affichent.
4	Bouton [<i>AUTO ZERO</i>]	Pour régler le signal du détecteur sur zéro.
5	Bouton [<i>START PUMP</i>]	Pour démarrer la pompe.
	Bouton [<i>STOP PUMP</i>]	Pour arrêter la pompe.
6	Bouton [<i>INJECTION</i>]	Pour démarrer l'injection après le démarrage de la pompe.
	Bouton [<i>END INJECTION</i>]	Pour terminer l'injection.
7	VANNE DE CO ₂ (grise)	La vanne est fermée.
	VANNE DE CO ₂ (verte)	La vanne est ouverte.
	VANNE DE CO ₂ (rouge)	La pression d'entrée du CO ₂ est trop élevée, le système ne peut pas être démarré.
	VANNE DE CO ₂ (jaune/orange clignotant)	La pression d'entrée du CO ₂ est trop basse. Les pompes peuvent être démarrées manuellement pour un rinçage. Le démarrage d'un cycle automatique est impossible.
8	Bouton [<i>LAMP ON</i>]	Voir Onglet RUN METHOD.
9	Bouton [<i>TEMPERATURE</i>]	
10	Bouton [<i>BACK PRESSURE</i>]	

6.3.1 Rinçage de la tubulure et de la seringue

Chemin de navigation :

→ *MANUAL*

- ▶ Appuyer sur le bouton [*FILL SYRINGE*] pour rincer la tubulure vers la seringue.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie numérique.
- ▶ Saisir la valeur.
- ▶ Appuyer sur le bouton [*OK*] pour confirmer.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.



6.3.2 Démarrage de la pompe



REMARQUE


Avant ou pendant l'exécution d'une méthode isocratique après le démarrage du mode manuel. En appuyant sur le bouton *[STOP PUMP]*, une nouvelle fenêtre s'ouvre et permet à l'opérateur de modifier les paramètres ou d'arrêter la pompe.

Chemin de navigation :

→ *MANUAL*

▶ Appuyer sur le bouton *[START PUMP]*.

⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

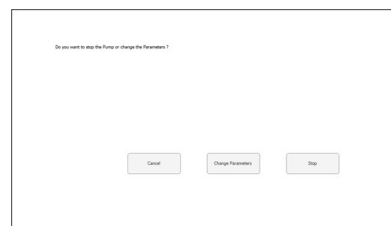

▶ Appuyer sur le bouton *[CHANGE PARAMETERS]*.

⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour modifier le débit et le pourcentage du modificateur.

▶ Saisir la valeur.

▶ Appuyer sur le bouton *[OK]* pour confirmer.

⇒ La valeur est enregistrée.

⇒ La boîte de dialogue se ferme.




▶ Appuyer sur le bouton *[INJECTION]*.

▶ Saisir la valeur.

▶ Appuyer sur le bouton *[OK]* pour confirmer.

⇒ La valeur est enregistrée.

⇒ La boîte de dialogue se ferme.

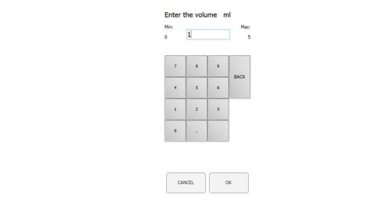

▶ Appuyer sur le bouton *[END INJECTION]* pour cesser l'injection.

▶ Appuyer sur *[STOP PUMP]* pour arrêter la pompe.

REMARQUE ! Un cycle automatique peut être démarré alors que la pompe est toujours en marche, mais l'injection doit être terminée.

Le chromatogramme peut ensuite être sélectionné dans le menu *COLLECTION*. Les paramètres de fractionnement peuvent être ajustés pour d'autres séparations automatisées.

6.3.3 Réglage du signal du détecteur sur zéro

Chemin de navigation :

→ *MANUAL* → *[SERVICE]*

► Appuyer sur le bouton *[AUTO ZERO]*.

⇒ Le signal du détecteur est réglé sur zéro.

6.3.4 Remplacement du module de recyclage du CO₂

Chemin de navigation :

→ *MANUAL* → *[SERVICE]*



REMARQUE


Les boutons activés sont de couleur verte.

► Appuyer sur le bouton *[SERVICE]*.

⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Les paramètres, les signaux des capteurs et les positions des vannes du module de recyclage s'affichent.

► Afficher le tableau des paramètres.

► Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver.

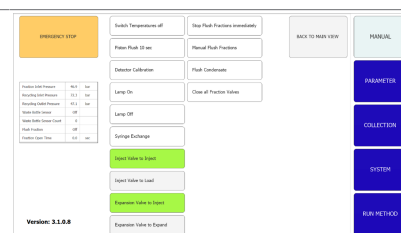

► Appuyer sur le bouton *[BACK TO MAIN VIEW]* pour fermer la fenêtre.

⇒ La fenêtre se ferme automatiquement.

6.4 Onglet PARAMETER

Le menu des paramètres comporte deux modes isocratiques en fonction de la configuration :

- Détecteur UV
- Détecteur DAD (en option)

N°	Nom	Description
1	Onglet <i>PARAMETER</i>	Pour définir, charger et modifier le paramètre.
2	Equilibration	Durée d'étalonnage de la colonne en minutes.
3	Run Time	Durée d'exécution de la séparation en minutes.
4	Flow	Débit en mL/min.
5	Modifier	Concentration du modificateur en pourcentage.
6	Add-On Flow	Débit en mL/min de la pompe complémentaire
7	Use Add-On	Détermine si la troisième pompe est utilisée comme pompe complémentaire (activée) ou fonctionne avec la pompe du modificateur (désactivée).
8	Use GLS tandem mode	Combine deux SGL pour des débits plus élevés
9	Wavelength	Longueur d'onde à laquelle la détection s'effectue en nm.
10	ELSD Gain	Nombre de gains du DEDL.
11	Injection	Volume d'injection en mL.
12	No. of Injections	Nombre d'injections à effectuer l'une après l'autre.
13	Modifier	Sélection de l'entrée de la pompe au niveau de la pompe du modificateur.

6.4.1 Définition de nouvelles méthodes

Chemin de navigation :

→ *PARAMETER*

- ▶ Appuyer sur le bouton *[METHOD NAME]*.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie numérique.
 - ▶ Saisir la valeur.
 - ▶ Appuyer sur le bouton *[OK]* pour confirmer.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
 - ▶ Appuyer sur le bouton *[...]* de COLUMN pour saisir une désignation de colonne.
 - ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour choisir une colonne dans une liste ou en ajouter une nouvelle.
 - ▶ Appuyer sur le bouton *[A], [B], [C], [D]* approprié pour sélectionner le raccordement du solvant.
 - ▶ Appuyer sur le bouton *[...]* de MODIFIER pour saisir une désignation de modificateur.
 - ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour choisir un solvant dans une liste ou en ajouter un nouveau.
 - ▶ Définir les paramètres dans la partie gauche de la fenêtre.
- Détecteur en option
- ▶ Appuyer sur le bouton *[...]* de WAVELENGTH pour définir le nombre de longueurs d'onde.
-


6.4.2 Réglage du mode gradient

Chemin de navigation :

→ *PARAMETER*

- ▶ Appuyer sur le bouton *[GRADIENT]*.
 - ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant le tableau des gradients.
 - ▶ Appuyer sur le tableau des gradients.
 - ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour modifier le tableau des gradients.
-

- ▶ Appuyer sur le champ du panneau de commande avec un arrière-plan bleu ou blanc pour saisir les valeurs de durée, de modificateur et de débit.

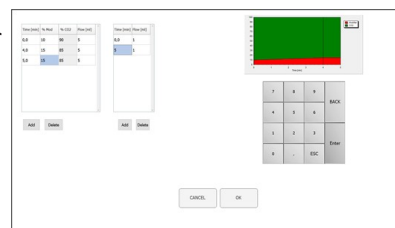


- ▶ Saisir la valeur.
- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour confirmer.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

REMARQUE ! Le volume de CO₂ nécessaire est calculé automatiquement.

- ▶ Appuyer sur le bouton [ADD] pour insérer une ligne au bas du tableau.
- ▶ Sélectionner une ligne et appuyer sur le bouton [DELETE] pour supprimer une ligne.

REMARQUE ! L'évolution du gradient est indiquée dans la partie supérieure gauche de la fenêtre des gradients.

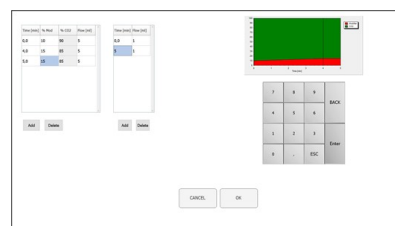

- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour confirmer et revenir au menu des paramètres.
- ▶ Appuyer sur le bouton [CANCEL] pour abandonner les modifications et revenir au menu des paramètres.
 - ⇒ Le gradient programmé s'affiche.

REMARQUE ! En mode isocratique et en mode gradient, les valeurs de la durée d'étalonnage, de la longueur d'onde, du volume d'injection et de l'entrée du modificateur sont déterminées dans cette fenêtre.



- ▶ Appuyer sur le bouton [SAVE AS] pour enregistrer le paramètre sous un autre nom.
 - ⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie alphanumérique.
- ▶ Appuyer sur le bouton [SAVE] pour définir le paramètre dans les méthodes.

REMARQUE ! Le nombre d'injections à effectuer dans l'ordre n'est pas enregistré dans la méthode et doit être spécifié à nouveau à chaque rechargement de la méthode ou démarrage du système.

6.4.3 Chargement des méthodes enregistrées

Chemin de navigation :


→ PARAMETER

- ▶ Appuyer sur le bouton [Load] pour ouvrir les méthodes enregistrées.
 - ⇒ Une liste de toutes les méthodes s'affiche.
- ▶ Sélectionner la méthode requise.
- ▶ Appuyer sur le bouton [Load] pour ouvrir la méthode sélectionnée.

6.4.4 Modification des méthodes enregistrées

Une méthode ayant été enregistrée et ouverte peut être traitée comme décrit dans Chapitre 6.4.1 "Définition de nouvelles méthodes", page 33. Cette méthode doit être réenregistrée avant de la lancer.

6.5 Onglet COLLECTION

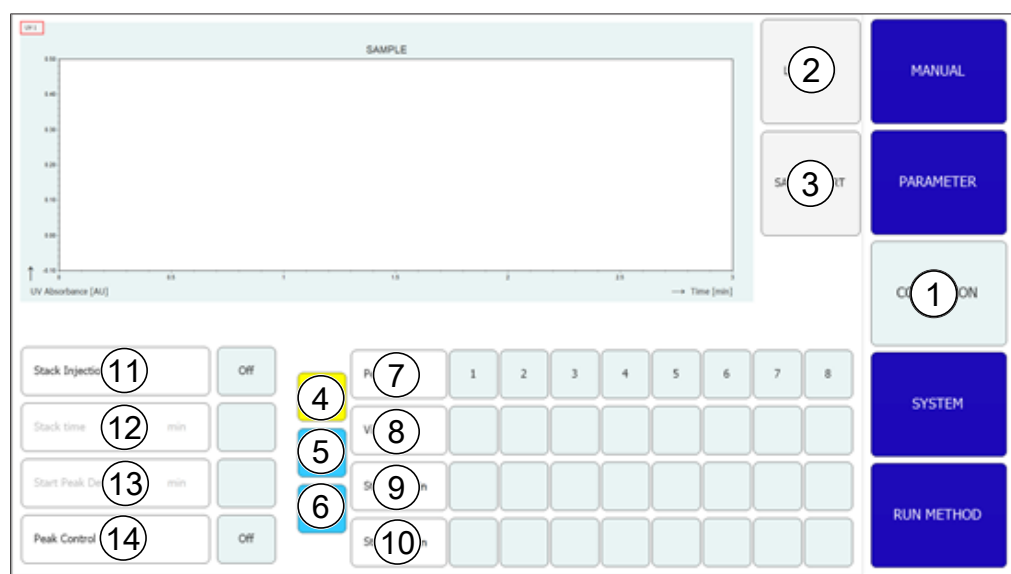

N°	Nom	Description
1	Onglet <i>COLLECTION</i>	Pour configurer les conditions de fractionnement, le nombre de pics à collecter et la méthode de fractionnement.
2	Bouton [<i>Load Run</i>]	Pour ouvrir les cycles terminés.
3	Bouton [<i>Save Report</i>]	Permet à l'opérateur d'enregistrer un rapport au format PDF.
4	Bouton [<i>TIME</i>]	Choisit le fractionnement en fonction du temps.
5	Bouton [<i>PEAK</i>]	Choisit le fractionnement en fonction du pic.
6	Bouton [<i>T/P</i>]	Active le fractionnement combiné. Dans ce mode, les pics sont recherchés dans les intervalles programmés.
7	Peak No.	Nombre de pics à collecter.
8	Vial	Flacon de fractions dans lequel la fraction est collectée.
9	Start min	Début du fractionnement.
	Start AU	Cette valeur correspond au seuil de début de la collecte.
10	Stop min	Fin du fractionnement.
	Stop AU	Fin de la détection des pics.
11	Stack injection	Pour démarrer et arrêter l'injection à étages.
12	Stack time	Durée entre une injection et la suivante.
13	Start peak detect time	Pour lancer le mode de détection et contrôler les pics.
14	Peak control	Pour définir les paramètres pour plusieurs injections.
	Trace	Détecteurs en option. Détermine quelle longueur d'onde UV est utilisée pour la détection des pics. Cette valeur est utilisée pour déterminer la ligne du chromatogramme qui apparaît dans le graphique de présentation du menu RUN.
	V	Partie intermédiaire entre les pics, la « vallée ».



REMARQUE

Il est possible de collecter jusqu'à huit fractions au total. Toutes les parties d'un cycle qui ne doivent pas être collectées seront capturées dans le récipient à rebut.

Fenêtre de contrôle des pics

The screenshot shows a control window with five rows of settings, each with a circled number from 1 to 5. At the bottom are 'CANCEL' and 'OK' buttons.


1	Use Peak Control	On
2	Controlled Peak	0
3	Automatic Shift	OFF
4	Max. Shift	600
5	Min. Height	0

CANCEL OK

N°	Nom	Description
1	Use Peak Control	Activer et désactiver le contrôle des pics.
2	Controlled Peak	Numéro du pic contrôlé.
3	Automatic Shift ON	La fenêtre de collecte est automatiquement corrigée.
	Automatic Shift OFF	On observe que le décalage du pic est plus petit que le décalage maximal.
4	Max. Shift	La différence de décalage maximal est exprimée en secondes. Décalage maximal autorisé par rapport au temps de rétention observé lors de la première injection.

N°	Nom	Description
5	Min. Height	<p data-bbox="847 232 1394 461">La hauteur minimale est exprimée en pourcentage. Compare la hauteur minimale du pic contrôlé au premier pic d'injection. Si le pic est plus petit, le cycle est automatiquement arrêté. La hauteur minimale est exprimée en pourcentage.</p> <p data-bbox="847 472 1394 542">Si le pic est plus petit, le cycle est automatiquement arrêté.</p>

Diagramme d'injection

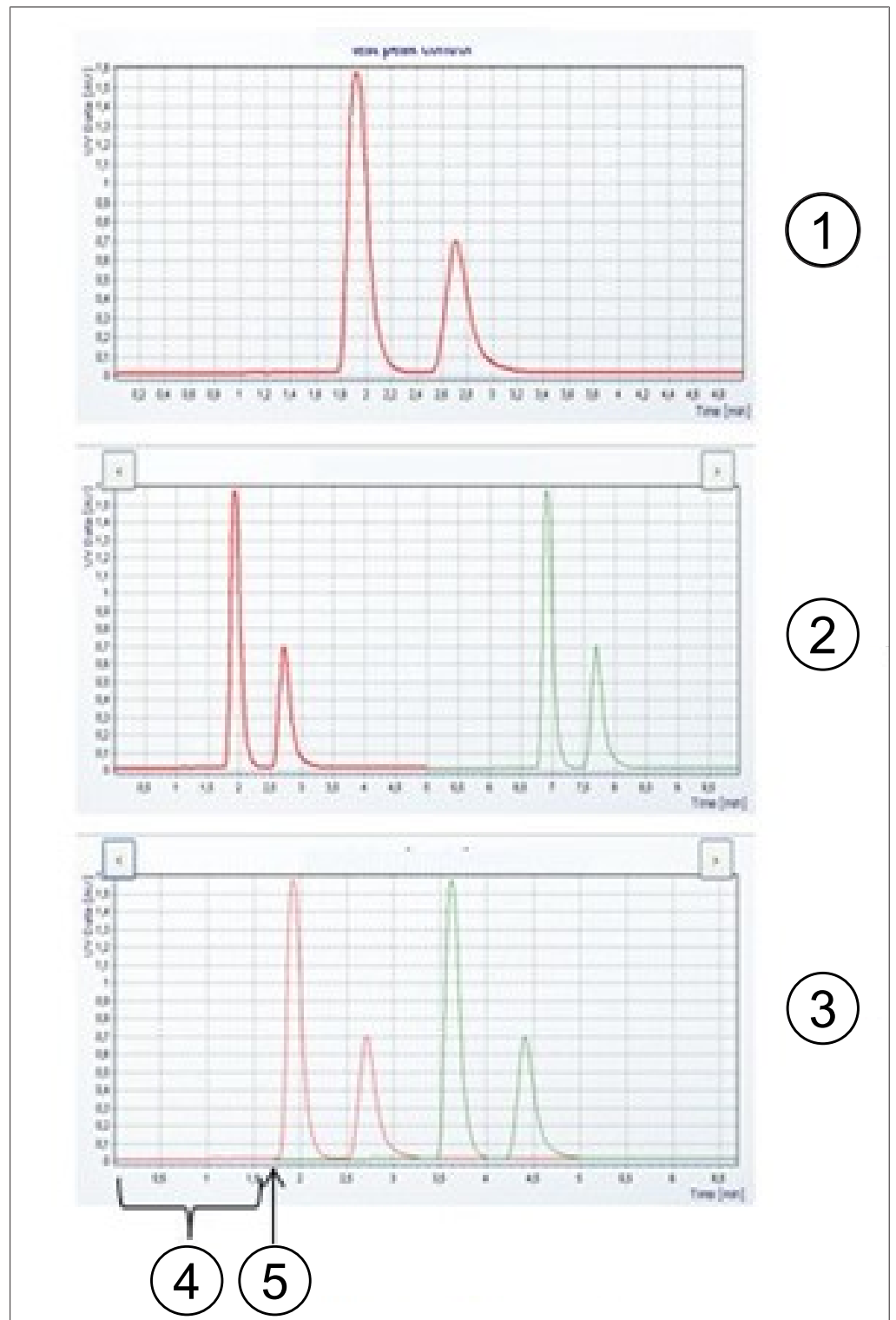

N°	Nom	Description
1	Première injection	Chromatogramme de la première injection.
2	Injections multiples	Chromatogramme d'injections multiples.
3	Injections à étages	Chromatogramme d'injections à étages.
4	Durée d'un étage	Durée entre une injection et la suivante.

N°	Nom	Description
5	Démarrer la deuxième injection	Moment auquel a lieu la deuxième injection.

6.5.1 Réglage du contrôle de pics

Lors de l'utilisation d'un mode de fractionnement avec détection de pics, le nombre de pics programmé est comparé au nombre réel de pics détectés à la fin de chaque injection. Le cycle s'arrête automatiquement si la détection de pics échoue.

Le nombre de pics à collecter est déterminé en appuyant sur le nombre de pics approprié. L'opérateur peut spécifier l'heure de début et de fin du fractionnement ainsi que le flacon d'échantillon dans lequel les fractions sont collectées pour le nombre sélectionné. L'heure de début du pic suivant doit être supérieure à l'heure de fin du pic précédent. L'heure de fin de la fraction finale doit être inférieure à la durée d'exécution de la séparation totale. Appuyer sur le bouton *[Peak No.]* si aucun pic ne doit être collecté. Cela désactive les champs de saisie.

La fonction de contrôle des pics permet au système de reconnaître automatiquement lorsqu'un pic se trouve en dehors de la zone de collecte et d'arrêter le cycle ou de corriger la fenêtre de collecte en conséquence.

En cas d'utilisation d'un mode avec détection de pics, le nombre de pics détectés doit être identique au nombre de pics programmés, sinon le cycle s'arrête. Ce test est effectué même si le contrôle de pics est désactivé.

Chemin de navigation :

→ *COLLECTION* → *[Peak control]*

- ▶ Appuyer sur le bouton *[OFF]* pour désactiver le contrôle de pics.
- ▶ Appuyer sur le bouton *[ON]* pour activer le contrôle de pics.
- ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour définir les conditions de contrôle.
- ▶ Définir les conditions de contrôle.

- ▶ Appuyer sur le bouton *[OK]* pour confirmer.

6.5.2 Réglage de l'injection à étages

L'injection à étages en mode isocratique permet de gagner du temps lors du fractionnement d'échantillons de grande taille. Les portions d'échantillons sont injectées après l'élution d'un pic.

Chemin de navigation :

→ *COLLECTION*

- Appuyer sur le bouton *[Stack injection]* pour choisir l'option d'injection à étages.




- Appuyer sur le bouton *[Stack time]* pour saisir la durée d'un étage.

⇒ La durée d'un étage détermine le moment auquel l'injection suivante est effectuée. Cette durée doit être plus courte que le temps d'exécution, mais suffisamment longue pour inclure tous les fractionnements.



6.6 Onglet SYSTEM

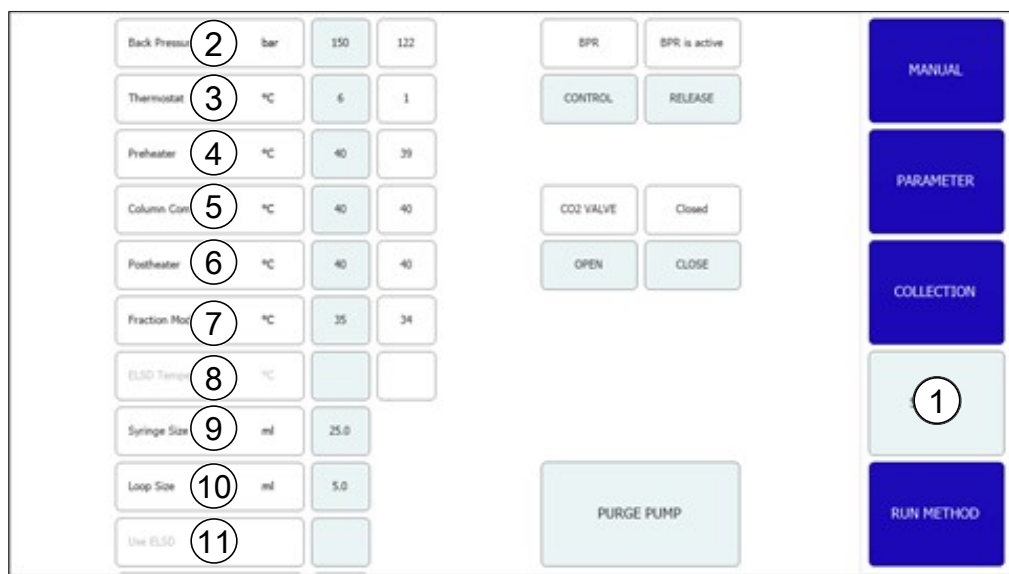

N°	Nom	Description
1	Onglet <i>SYSTEM</i>	Pour configurer les paramètres du système. Les paramètres du système sont définis dans cette fenêtre. Ils ne dépendent pas de la méthode chargée et peuvent être réglés individuellement pour chaque cycle.
2	Back Pressure	Indique la contre-pression dans le système en bars.
3	Thermostat	Température dans l'échangeur thermique en °C.

N°	Nom	Description
4	Preheater	Température dans le préchauffeur en °C.
5	Column Compartment	Température dans le four à colonne en °C.
6	Postheater	Température au niveau du dispositif de post-chauffage en °C.
7	Fraction Module	Température au niveau du module de fractionnement en °C.
8	ELSD Temperature	Température du DEDL en °C.
9	Syringe Size	Volume de la seringue en mL ou µL.
10	Loop Size	Volume de la boucle d'injection en mL.
11	Use ELSD	Permet de mettre le détecteur DEDL sous et hors tension.

6.6.1 Commande de la contre-pression

Le bouton de commande du régulateur de contre-pression se situe dans le coin supérieur droit. Le champ blanc indique le statut du régulateur de contre-pression.

Chemin de navigation :

→ *SYSTEM*

Condition requise :

- L'instrument est en cours d'exécution. Statut du BPR affiché : BPR is active.

▶ Appuyer sur le bouton [*RELEASE*].

⇒ La vanne s'ouvre et relâche la pression dans le système. Le statut du BPR passe à BPR is open.



Condition requise :

- Statut du BPR affiché : BPR is open.

▶ Appuyer sur le bouton [*CONTROL*].

⇒ La vanne se ferme et active la régulation de contre-pression. Le statut du BPR passe à BPR is active.



6.6.2 Commande de la vanne de CO₂

Le bouton de commande de la vanne de CO₂ se situe au milieu. Le champ blanc indique le statut de la vanne de CO₂.

Chemin de navigation :

→ *SYSTEM*

Condition requise :

Statut de la VANNE DE CO₂ affiché : Closed.

▶ Appuyer sur le bouton [OPEN].

⇒ La vanne s'ouvre. Le statut de la VANNE DE CO₂ passe à Open.



Condition requise :

Statut de la VANNE DE CO₂ affiché : Open.

▶ Appuyer sur le bouton [CLOSE].

⇒ La vanne se ferme. Le statut de la VANNE DE CO₂ passe à Closed.



6.6.3 Commande de la pompe de purge

Chemin de navigation :

→ SYSTEM → [Purge Pump]


Condition requise :

L'instrument est en cours d'exécution.

Statut de la VANNE DE CO₂ affiché : Closed.

▶ Appuyer sur le bouton [Purge Modifier Pump] ou [Purge Add-on Pump].

⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour régler la pompe du modificateur.

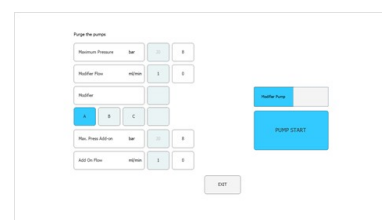

▶ Appuyer sur le bouton [Open] pour débloquer le robinet de purge des pompes.

REMARQUE ! La pompe complémentaire de purge ne comporte qu'une seule entrée. Il n'est pas possible de sélectionner l'entrée du modificateur.


REMARQUE ! Si la pression au niveau de la pompe est supérieure à la pression maximale de la pompe de purge, elle ne commencera pas à purger.

▶ Sélectionner l'entrée du modificateur et le débit.

▶ Appuyer sur le bouton [Pump Start] pour lancer le processus.

▶ Appuyer sur le bouton [Pump Stop] pour fermer le robinet de purge au niveau de la pompe et quitter la purge.

6.7 Onglet RUN METHOD

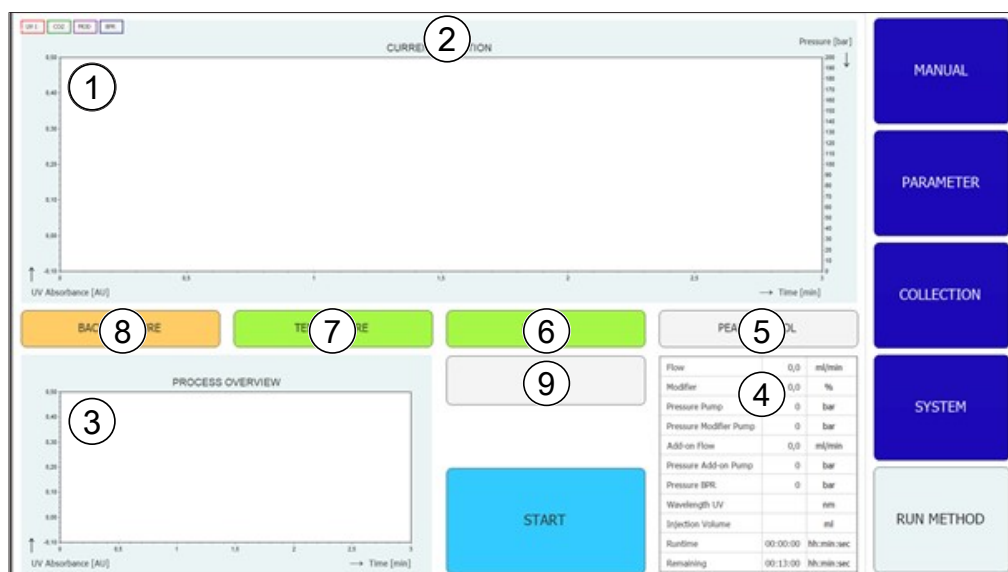

N°	Nom	Description
1	Chromatogramme	Le chromatogramme actuel est affiché dans la partie supérieure de la fenêtre.
2	Barre de titre	Le nom de la méthode et le nom de l'échantillon apparaissent dans la barre de titre. Le numéro de l'injection est indiqué dans la barre de titre.
3	Graphique de présentation du processus	Dans le graphique de présentation du processus dans le coin inférieur gauche, l'affichage des chromatogrammes est superposé en cas d'injections multiples. Dans le cas d'une injection à étages, l'affichage des fractions collectées est superposé.
4	État des paramètres	L'état des paramètres individuels du système et des paramètres de la méthode au cours du cycle est indiqué dans le tableau en bas à droite.
5	Bouton [PEAK CONTROL] (gris)	Le contrôle des pics est désactivé.
	Bouton [PEAK CONTROL] (vert)	Le contrôle des pics est activé. La position des pics n'a pas changé par rapport à la première injection.
	Bouton [PEAK CONTROL] (orange)	Le contrôle des pics est activé. Le pic surveillé a été déplacé et la fenêtre de collecte a été ajustée automatiquement.
	Bouton [PEAK CONTROL] (rouge)	Le contrôle des pics est activé. Le pic surveillé est en dehors de la plage de collecte et le cycle a été arrêté.

N°	Nom	Description
6	Bouton [<i>LAMP OFF</i>] (gris)	La lampe est éteinte.
	Bouton [<i>LAMP HEATING</i>] (jaune)	La lampe chauffe.
	Bouton [<i>LAMP ON</i>] (vert)	La lampe est allumée.
7	Bouton [<i>TEMPERATURE</i>] (rouge)	Les températures de l'ensemble des pièces surveillées (compartiment de colonne, préchauffage et module de fractionnement) n'ont pas été atteintes. Le cycle ne peut pas être lancé.
	Bouton [<i>TEMPERATURE</i>] (jaune)	Le compartiment de la colonne et le préchauffage ont atteint la température définie. Le cycle peut être lancé.
	Bouton [<i>TEMPERATURE</i>] (vert)	Le module de fractionnement ainsi que le compartiment de la colonne et le préchauffage ont atteint leurs intervalles de température. Des injections peuvent être effectuées.
8	Bouton [<i>BACK PRESSURE</i>] (orange)	La vanne du régulateur de contre-pression est active. Les pompes peuvent être démarrées. Un cycle peut également être lancé, mais la durée d'étalonnage ne commence son décompte qu'une fois la contre-pression atteinte.
	Bouton [<i>BACK PRESSURE</i>] (vert)	La contre-pression définie dans le système a été atteinte. Le cycle peut être lancé.
	Bouton [<i>BACK PRESSURE</i>] (jaune)	La contre-pression définie dans le système n'a pas été atteinte dans les 2 minutes suivant le démarrage ou la pression a été inférieure de 10 bars à la pression de réglage pendant plus de 30 s durant le cycle ou la pression a chuté de plus de 50 bars durant le cycle. Les pompes sont désactivées, car il y a peut-être une fuite.
9	Bouton [<i>CHANGE</i>]	Le bouton permet de modifier les paramètres durant le cycle.

6.7.1 Avant de lancer un cycle

Chemin de navigation :

→ *RUN METHOD*

► Appuyer sur le bouton [*Start*].

⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie numérique.

► Saisir le nom de l'échantillon.

- ▶ Appuyer sur le bouton *[OK]* pour confirmer.
 - ⇒ La valeur est enregistrée.
 - ⇒ La boîte de dialogue se ferme.
-
- ▶ Lancer un cycle. Voir Chapitre 7.5 "Lancement d'un cycle", page 55.
-

6.8 Modifications au cours d'un cycle



REMARQUE

Le nombre minimum d'injections est l'injection en cours ou 1, si l'étalonnage est toujours en cours.

Le nombre d'injections peut être modifié pour tous les types d'injection.



REMARQUE

Avec l'injection multiple, il est possible d'ajuster le volume d'injection et la durée d'exécution des cycles isocratiques.



REMARQUE

Une modification du volume d'injection est effective à la prochaine aspiration du volume d'échantillon qui n'a pas encore commencé. Si le début du processus d'injection intervient plus tard que prévu en raison d'un nouveau volume plus important, l'injection suivante attendra le temps nécessaire. La durée d'exécution n'en sera pas affectée.



REMARQUE

Les paramètres de fractionnement peuvent être ajustés en commençant par le deuxième fractionnement.



REMARQUE

Lorsque les seuils sont modifiés, l'effet est simulé sur ce qui est déjà enregistré et affiché sur le graphique pour montrer l'effet. Une augmentation de la pente de la queue (flèches vers la droite) déplace la ligne vers la gauche et vice versa.



REMARQUE

Si les intervalles de collecte sont modifiés, les valeurs utilisées à l'origine s'affichent dans une couleur moins vive, les valeurs désormais utilisées s'affichent dans la couleur connue.



REMARQUE

Si des cycles sont chargés dans le menu de collecte, les valeurs d'origine de la collecte s'affichent. Si une seule injection est affichée, les valeurs utilisées dans cette injection s'affichent.

6.8.1 Modification du nombre d'injections

Chemin de navigation :

→ *RUN METHOD* → *[Change]*


REMARQUE ! Cette fenêtre se ferme automatiquement au bout de 10 secondes en l'absence de sélection.

► Appuyer sur le bouton *[No. of Injections]* pour modifier le nombre d'injections.

⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



► Appuyer sur un bouton *[negative number]* pour définir un nombre minimum.

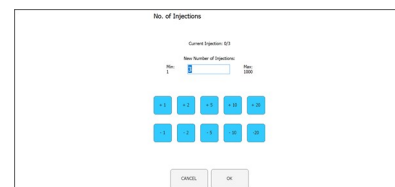

► Appuyer sur le bouton *[CANCEL]* pour fermer la fenêtre sans aucune modification.

► Appuyer sur le bouton *[OK]* pour mettre à jour la version de la quantité de solvant.

⇒ La fenêtre se ferme automatiquement.

6.8.2 Modifier les paramètres d'injection et de durée d'exécution

Chemin de navigation :

→ *RUN METHOD* → *[Change]*


REMARQUE ! Cette fenêtre se ferme automatiquement au bout de 10 secondes en l'absence de sélection.

► Appuyer sur le bouton *[Injection]* ou *[Run Time]* pour modifier les paramètres.

⇒ L'écran affiche une boîte de dialogue comprenant un champ de saisie numérique.



- ▶ Saisir la valeur.
- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour confirmer.
- ⇒ La valeur est enregistrée.
- ⇒ La boîte de dialogue se ferme.

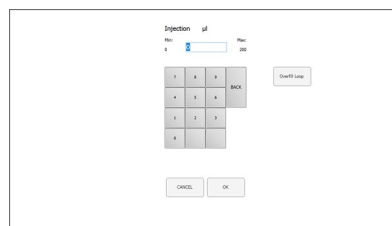

REMARQUE ! Le volume maximal utilisé est non seulement déterminé par la boucle d'injection ou la taille de la seringue, mais aussi par le temps entre les injections.

- ▶ Appuyer sur le bouton [CANCEL] pour fermer la fenêtre sans aucune modification.
- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour mettre à jour la version de la quantité de solvant.
- ⇒ La fenêtre se ferme automatiquement.

6.8.3 Modification du paramètre de fraction

Chemin de navigation :


→ RUN METHOD → [Change]

REMARQUE ! Cette fenêtre se ferme automatiquement au bout de 10 secondes en l'absence de sélection.

- ▶ Appuyer sur le bouton [Collection Parameters].
- ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre.




- ▶ Appuyer sur le bouton [Show Last].
- ⇒ Permet d'afficher et de basculer entre la dernière, les deux dernières ou les trois dernières injections (si elles sont déjà enregistrées).

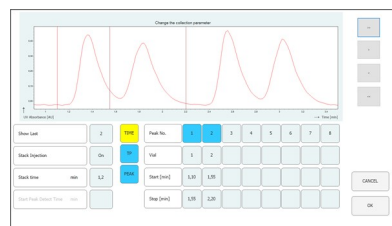


REMARQUE ! La méthode de fractionnement (basée sur la durée et/ou le pic) ainsi que l'heure de début de détection des pics ne peuvent pas être modifiées une fois le cycle lancé. Ces boutons sont uniquement à titre d'information.

- ▶ Appuyer sur l'un des boutons de valeur pour Démarrer ou Arrêter pour modifier le paramètre de fraction.
- ⇒ La valeur s'affiche en bleu.

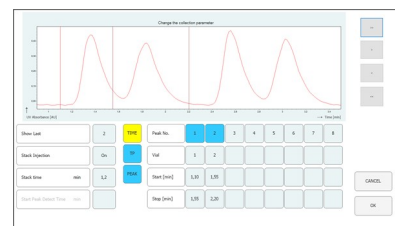

- ▶ Appuyer sur le bouton [>] pour modifier la valeur + 0,01.
- ▶ Appuyer sur le bouton [<] pour modifier la valeur - 0,01.
- ▶ Appuyer sur le bouton [>>] pour modifier la valeur + 0,05.
- ▶ Appuyer sur le bouton [<<] pour modifier la valeur - 0,05.

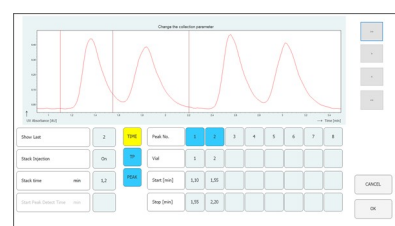

- ▶ Appuyer sur le bouton [OK] pour appliquer les modifications.

6.9 Module de recyclage du CO₂

Chemin de navigation :

→ MANUAL → [SERVICE]

EMERGENCY STOP **2**

Fraction Inlet Pressure	46.9	bar
Recycling Inlet Pressure	72.3	bar
Recycling Outlet Pressure	47.1	bar
Waste Bottle Sensor	Off	
Waste Bottle Sensor Count	0	
Flush Fraction	Off	
Fraction Open Time	0.0	sec

Version: 3.1.0.8

Switch Temperature off **5**

Piston Flush **6**

Detector Count **7**

Lamp On **8**

Lamp Off **9**

Syringe Expansion **10**

Inject Valve **11**

Inject Valve **12**

Expansion **13**

Expansion **14**

Stop Flush **15**

Manual Flush **16**

Flush Condition **17**

Close all Flows **18**

BACK **3** VIEW

1

PARAMETER

COLLECTION

SYSTEM

RUN METHOD

N°	Nom	Description
1	Onglet <i>MANUAL</i>	Pour démarrer et arrêter un cycle manuellement.
2	Bouton [<i>EMERGENCY STOP</i>]	Pour effectuer l'ARRÊT D'URGENCE.
3	Bouton [<i>BACK TO MAIN VIEW</i>]	Pour revenir à l'onglet <i>MANUAL</i> .
4	Tableau des paramètres	Pour afficher plusieurs paramètres relatifs au module de recyclage.
5	Bouton [<i>Switch Temperature OFF</i>]	Pour désactiver tous les régulateurs de température.
6	Bouton [<i>Piston Flush 10 sec</i>]	Pour rincer le piston pendant 10 s.
7	Bouton [<i>Detector Calibration</i>]	Pour démarrer manuellement l'étalonnage du détecteur UV.
8	Bouton [<i>Lamp ON</i>]	Pour allumer la lampe.
9	Bouton [<i>Lamp OFF</i>]	Pour éteindre la lampe.
10	Bouton [<i>Syringe Exchange</i>]	Déplacer la pompe à seringue dans une position permettant le remplacement de la seringue en verre.
11	Bouton [<i>Inject Valve to Inject</i>]	Pour mettre la vanne d'injection en position manuelle.
12	Bouton [<i>Inject Valve to Load</i>]	Pour mettre la vanne d'injection en position de chargement.
13	Bouton [<i>Expansion Valve to Inject</i>]	Pour mettre le détendeur en mode d'injection.
14	Bouton [<i>Expansion Valve to Expand</i>]	Pour basculer le détendeur en mode d'expansion.
15	Bouton [<i>Stop Flush Fraction immediately</i>]	Ce bouton annule les cycles de fractionnement des 10 canaux SGL.
16	Bouton [<i>Manual Flush Fractions</i>]	Ce bouton lance le cycle de fractionnement d'un canal SGL pouvant être sélectionné dans une nouvelle fenêtre.
17	Bouton [<i>Flush condensate</i>]	Ce bouton simule une détection de liquide dans le premier cylindre, de sorte que tout condensat des résidus soit évacué.
18	Bouton [<i>Close all Fraction Valves</i>]	Ce bouton ferme toutes les vannes à fractions pour effectuer un entretien sur le module de recyclage.
19	Version du logiciel	Affiche la version actuelle du logiciel.

Tableau des paramètres

Fraction Inlet Pressure	1	46.9	bar
Recycling Inlet Pressure	2	72.3	bar
Recycling Outlet Pressure	3	47.1	bar
Waste Bottle Sensor	4	Off	
Waste Bottle Sensor Count	5	0	
Flush Fraction	6	Off	
Fraction Open Time	7	0.0	sec

N°	Nom	Description
1	Fraction Inlet Pressure	Pression à l'entrée des séparateurs gaz-liquide
2	Recycling Inlet Pressure	Pression de l'alimentation en CO ₂ qui passe dans le module de recyclage
3	Recycling Outlet Pressure	Pression du CO ₂ recyclé
4	Waste Bottle Sensor	Le capteur est réglé pour détecter du liquide sur <i>[ON]</i> ou non sur <i>[OFF]</i>
5	Waste Bottle Sensor Count	Cette valeur indique la fréquence à laquelle le capteur a détecté du liquide. Cette valeur indique la stabilité avec laquelle le module de recyclage et les séparateurs gaz-liquide fonctionnent. Une valeur faible signifie des conditions stables. Une valeur élevée signifie qu'une grande quantité de liquide est entraînée. Cette valeur est définie sur zéro à chaque démarrage dans la fenêtre de la méthode d'exécution.
6	Flush Fraction	Cette valeur indique si la sortie de la vanne de fraction est fermée (OFF) ou ouverte (ON).
7	Fraction Open Time	Cette valeur indique que le fractionnement est en cours et le temps pendant lequel la vanne de fraction vers l'intérieur est encore ouverte.

Description fonctionnelle

Si la pression d'entrée de recyclage et la pression de sortie de recyclage sont approximativement égales, la pompe de CO₂ est approvisionnée en CO₂ recyclé. Dans le premier cylindre du module de recyclage, le modificateur dissous peut se condenser. Le liquide s'accumule au fond du cylindre, où une combinaison vanne-capteur-vanne est installée. Lorsque le capteur détecte du liquide, la vanne supérieure se ferme et la vanne inférieure s'ouvre pour purger le condensat. À cause du module de recyclage, les séparateurs gaz-liquide (SGL) sont également sous pression. Le liquide fractionné est acheminé vers le module de recyclage via des conduites flexibles stables à la pression. Une combinaison vanne-tube de stockage-vanne est disponible pour chacun des dix SGL. Lorsqu'un SGL est activé pour le fractionnement dans le logiciel, la vanne supérieure (vanne de fraction vers l'intérieur) s'ouvre et le tube de stockage se remplit de liquide fractionné. Le logiciel utilise le débit de la pompe du modificateur pour calculer la durée pendant laquelle la vanne peut rester ouverte et le moment où elle est pleine. Il ferme et ouvre la vanne inférieure (vanne de fraction vers l'extérieur) pour transférer le liquide fractionné dans le récipient de collecte.

7 Fonctionnement

7.1 Démarrage du système

▶ Allumer le thermostat externe. La température recommandée est de 5 °C.

▶ Allumer le refroidisseur.

▶ Appuyer sur l'**interrupteur Marche/Arrêt**.

⇒ Cela permet de mettre le matériel restant sous tension.

▶ Allumer le système à l'aide de l'**interrupteur principal**.

⇒ L'ordinateur et l'écran tactile démarrent également.

▶ Relâcher le bouton de l'interrupteur d'urgence.

▶ Appuyer sur le bouton vert à côté de l'interrupteur d'urgence.

▶ Appuyer sur le symbole [Prep SFC] sur l'écran tactile pour lancer le logiciel.

⇒ La fenêtre du logiciel de commande de la SFC préparative s'ouvre.



▶ Appuyer sur le bouton [Verify] pour s'assurer que tous les modules communiquent correctement.


7.2 Positionnement de l'échantillon



REMARQUE

Les tubes capillaires doivent descendre en ligne droite et sans tension.

- ▶ Placer le flacon d'échantillon dans le porte-échantillon.
- ▶ Faire passer les tubes capillaires dans les raccords du support jusqu'à ce qu'ils atteignent la base du flacon d'échantillon.

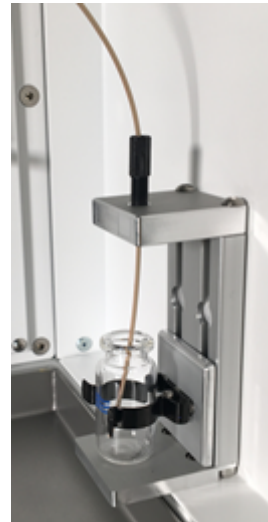


7.3 Positionnement des flacons de fractions



REMARQUE

Le numéro de SGL correspond au numéro de sortie de la vanne de fractionnement.

- ▶ Placer les flacons de fractions dans les positions spécifiées dans le menu de collecte.
- ▶ Fixer les tubes capillaires appropriés des séparateurs gaz-liquide au flacon de fractions.
- ▶ S'assurer que le flacon de rebut est en position centrale (position 9).

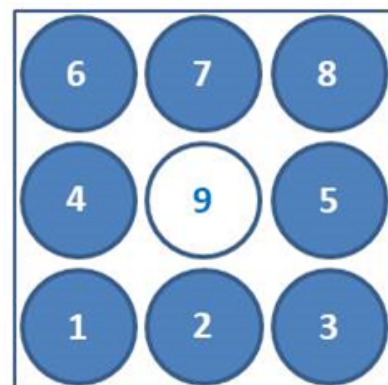

7.4 Sélection de la méthode

Chemin de navigation :

→ *PARAMETER*

- ▶ Appuyer sur le bouton [*Load*] pour sélectionner la méthode souhaitée.
- ▶ Spécifier le nombre d'injections qui doivent avoir lieu dans l'ordre.
- ▶ Vérifier si la bonne colonne est en place à la position de colonne sélectionnée.

- ▶ Appuyer sur le bouton du menu *COLLECTION*.
- ▶ Définir le nombre de fractions à collecter et l'échelle de temps de fractionnement.
- ▶ Vérifier les paramètres du système dans la fenêtre du système.

Consulter Logiciels pour plus d'informations sur la configuration des méthodes, l'ajustement des conditions de fractionnement et la spécification des paramètres du système.

7.5 Lancement d'un cycle



REMARQUE

En fonction des paramètres sélectionnés, un temps d'étalonnage de plusieurs minutes est nécessaire pour s'adapter au profil de température défini. La période recommandée la plus courte est de 5 minutes. Si aucun profil de température stable n'a encore été établi pendant ce temps, le temps d'étalonnage est automatiquement prolongé jusqu'à ce qu'un profil de température stable ait été établi ou qu'une durée maximale de 15 minutes ait été atteinte. Si aucun profil de température stable n'a été établi au bout de 15 minutes, le cycle est automatiquement arrêté.

Chemin de navigation :

→ *PARAMETER*

Condition requise :

- S'assurer qu'il y a suffisamment de CO₂ et de solvants pour terminer le cycle de séparation de l'échantillon. La consommation d'éluant dépend fortement de la méthode utilisée. Pour éviter d'endommager les pompes, il est nécessaire d'éviter de les faire fonctionner à sec.
- S'assurer que le volume des flacons de fraction et du récipient à rebut est suffisamment important pour toute la séparation afin d'éviter un remplissage excessif.
- S'assurer que le flacon de collecte est vide et que le bouchon du flacon de collecte est bien vissé.
- S'assurer que l'instrument est prêt à effectuer un cycle.
- S'assurer que la méthode et les conditions de fraction appropriées sont sélectionnées.
- ▶ Sélectionner la colonne, le gradient et la longueur d'onde de détection appropriés.
- ▶ Appuyer sur le bouton [*Pump Start*].
 - ⇒ Les pompes démarrent avec les conditions de démarrage du gradient sélectionné.

- ▶ Appuyer sur le bouton [*Injection*].
- ⇒ L'injection peut démarrer lorsque les conditions de température définies sont atteintes.


7.6 Fin d'un cycle



REMARQUE

Une fois le cycle terminé, les pompes s'arrêtent automatiquement et la vanne d'arrêt du CO₂ se ferme automatiquement. Les régulateurs de température et le régulateur de contre-pression restent actifs.

- ▶ Appuyer sur le bouton [*STOP*].
- ⇒ Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

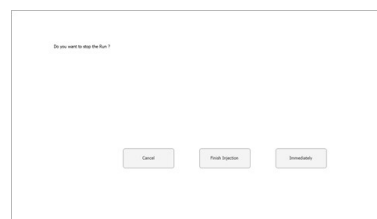

-
- ▶ Appuyer sur le bouton [*Cancel*].
 - ⇒ Le menu *RUN METHOD* s'ouvre, mais le cycle se poursuit.
-
- ▶ Appuyer sur le bouton [*Finish Injection*].
 - ⇒ Toutes les injections qui se trouvent déjà sur la colonne (injection à étages) seront terminées. Le système s'arrêtera ensuite. L'en-tête du bouton de démarrage automatique indique à présent Arrêté.
-
- ▶ Appuyer sur le bouton [*Immediately*].
 - ⇒ Le cycle s'arrête immédiatement.
-

7.7 Arrêt du système

Chemin de navigation :

→ *MANUAL*

-
- ▶ Appuyer sur le bouton [*EXIT*] pour fermer le logiciel de commande de la SFC préparative.
-
- ▶ Arrêter l'ordinateur Windows.
-
- ▶ Éteindre les systèmes à l'aide de l'**interrupteur principal** pour arrêter l'ensemble des modules.
-

7.8 Utilisation de l'interrupteur d'urgence

- ▶ Appuyer sur le bouton de l'**interrupteur d'urgence** pour éteindre les pompes, le détecteur et tous les modules à température contrôlée.
 - ⇒ Cela ferme la vanne d'arrêt du CO₂ qui n'émet plus de CO₂.
 - ⇒ L'ordinateur Windows est toujours en cours d'exécution. Aucune donnée n'est perdue à cause de l'utilisation du bouton d'arrêt d'urgence.
-

8 Nettoyage et entretien



REMARQUE

- ▶ Il n'est possible d'effectuer que les opérations d'entretien et de nettoyage décrites dans cette section.
- ▶ N'effectuer aucune opération d'entretien et de nettoyage impliquant l'ouverture du boîtier.
- ▶ N'utiliser que des pièces de rechange BUCHI d'origine afin d'assurer un fonctionnement correct et de préserver la garantie.
- ▶ Effectuer les opérations d'entretien et de nettoyage décrites dans cette section pour prolonger la durée de vie de l'instrument.

8.1 Pompes

Pour l'entretien de la pompe, consulter la documentation du fabricant.

8.2 Entretien des vannes d'injection

Il est possible d'ouvrir les vannes d'injection Rheodyne lorsqu'elles sont bloquées. Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer les joints et le stator dans un bain à ultrasons avec du méthanol. Les joints doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés. Les pièces nécessaires sont contenues dans le kit Rhebuild.

8.3 Nettoyage de la cuve à circulation du détecteur UV

Condition requise :

- La base du détecteur devient bruyante. Il est possible que des résidus d'échantillon se trouvent dans la cuve à circulation.
- ▶ Retirer les colonnes.
- ▶ Remplacer les colonnes par un tube capillaire en acier inoxydable.
- ▶ Rincer le tube capillaire en acier inoxydable avec un mélange de modificateurs du CO₂.

Pour obtenir des instructions supplémentaires, consulter le manuel du fabricant du détecteur UVD 2.1S Knauer.

8.4 Soupape du régulateur de contre-pression


Contactez le service client BUCHI en cas de problème avec la soupape du régulateur de contre-pression.

8.5 Vanne de fractionnement

8.5.1 Nettoyage de la vanne et remplacement du rotor

La vanne peut être nettoyée en rinçant l'intérieur des canaux avec un solvant adapté. Si cela ne résout pas le problème, il est possible de démonter la vanne de manière à pouvoir nettoyer les pièces plus soigneusement et à vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.

Les vannes ont des surfaces polies et étanches qu'il convient de protéger lors du démontage et du nettoyage. Travailler dans un environnement propre et placer les pièces sur un chiffon doux ou du papier propre.

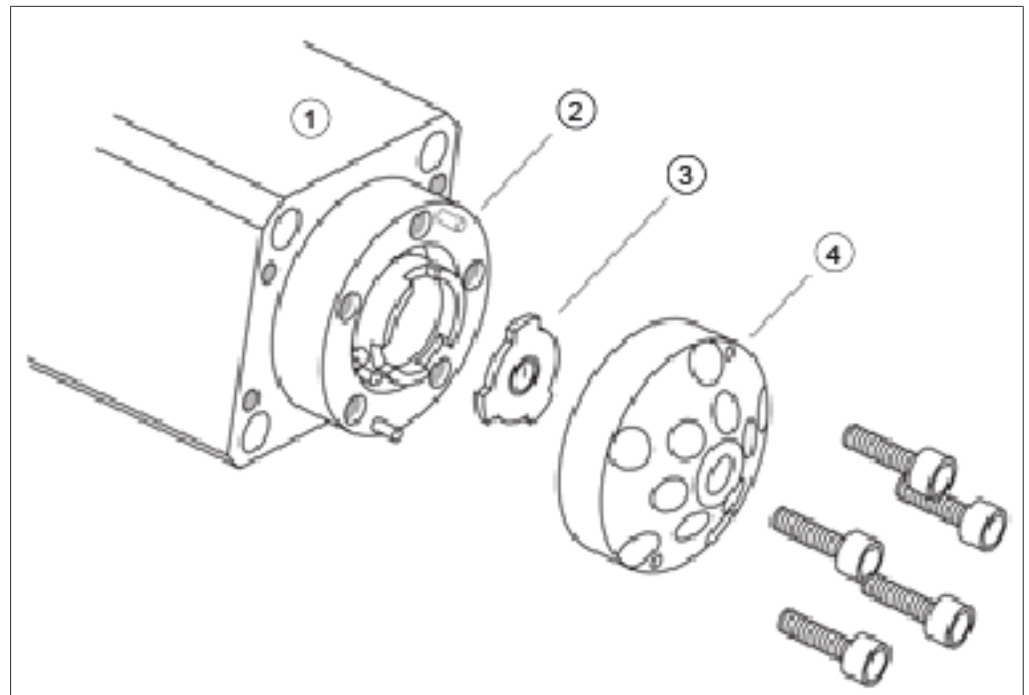

- | | | | |
|---|--------|---|----------------|
| 1 | Moteur | 2 | Corps |
| 3 | Rotor | 4 | Bouchon/stator |

8.5.2 Démontage

- ▶ Utiliser la clé hexagonale de 3/32 pouce fournie pour retirer les cinq vis à six pans creux qui fixent le stator au corps de la vanne.
- ▶ Placer le stator sur son côté extérieur pour éviter d'endommager sa surface étanche.
- ▶ Retirer avec précaution le rotor du moteur.
- ▶ Vérifier que la surface du rotor est exempte de rayures. Remplacer le rotor s'il est endommagé.
- ▶ Vérifier la surface du stator.
- ▶ Le remplacer s'il y a des rayures entre les raccords. Contacter le service clientèle de BUCHI pour faire examiner la pièce afin de déterminer s'il est possible de la remettre en état.
- ▶ Utiliser des solvants adaptés pour nettoyer toutes les pièces et veiller à ne pas rayer les surfaces. Il n'est pas nécessaire de sécher le rotor.

8.5.3 Assemblage

- ▶ Remettre le rotor sur le moteur. S'assurer que la surface du rotor avec l'encoche indiquant le débit est orientée vers l'extérieur.

- ▶ Remettre le rotor sur la vanne.
- ▶ Remettre les cinq vis à six pans creux en place, en ne les serrant que légèrement.
- ▶ Serrer les vis en diagonale, une par une, jusqu'à ce que toutes les vis soient serrées. Veiller à ne pas trop les serrer, car elles maintiennent uniquement la structure et n'affectent pas l'étanchéité.
- ▶ Tester la vanne dans le système sous pression.
- ▶ Contacter le service clientèle de BUCHI si les problèmes persistent.

8.6 Séparateurs gaz-liquide (SGL)



REMARQUE

Pour éviter toute contamination des fractions collectées, il est recommandé de rincer les séparateurs gaz-liquide avec un mélange de modificateurs de CO₂ après chaque cycle.

- ▶ Purger chaque SGL pendant 30 secondes avec un débit total et la teneur en modificateur.
 - ⇒ Si cela n'est pas suffisant, les nettoyer manuellement.
- ▶ Retirer les coupelles du SGL et les nettoyer manuellement dans un bain à ultrasons à l'aide d'un solvant approprié.
- ▶ Desserrer l'écrou-raccord vert.
- ▶ Retirer le bouchon du flacon.



- ▶ Desserrer les raccords du tube capillaire en PEEK marron sur le SGL.
- ▶ Retirer les raccords du tube capillaire en PEEK marron sur le SGL.



- ▶ Tirer délicatement l'isolant bleu verticalement vers le bas du SGL.



- ▶ Utiliser la clé du SGL fournie pour ouvrir le SGL en la tournant vers la gauche.
- ▶ Tenir le SGL d'une main et le retirer.



9 Dépannage

9.1 Dépannage

Problème	Cause possible	Action
L'ordinateur ne démarre pas ou l'écran tactile reste éteint	La fiche secteur n'est pas branchée	► Brancher la fiche secteur
	Le fusible ou le disjoncteur FI est déclenché	► Activer le fusible ou le disjoncteur FI
	Ordinateur ou écran tactile défectueux	► Contacter le service clientèle de BUCHI
La pompe ou le détecteur ne démarre pas	La fiche secteur n'est pas branchée	► Brancher la fiche secteur
	Le fusible ou le disjoncteur FI est déclenché	► Activer le fusible ou le disjoncteur FI
	Ordinateur ou écran tactile défectueux	► Contacter le service clientèle de BUCHI
Pression anormalement élevée	Pompe défectueuse	► Contacter le service clientèle de BUCHI
	Obstructions dans le système capillaire ou la colonne de séparation	
	Dysfonctionnement de la vanne	
Faible débit (pas de pression)	L'aspiration de la pompe ne fonctionne pas	► Fixer les raccords au tube capillaire d'aspiration, ouvrir le robinet de purge et la pompe à haut débit
	Fuites dans le système	► Fixer les raccords
Faible débit (avec pression)	Les joints de la pompe haute pression sont usés	► Remplacer les joints de la pompe haute pression
Fluctuation de pression	Les clapets antiretour sont sales ou usés	► Nettoyer ou remplacer les clapets antiretour. Voir le manuel de la pompe.
Les températures définies ne sont pas atteintes	Éléments de chauffe défectueux	► Contacter le service clientèle de BUCHI
	Contrôle de la température défectueux	

10 Mise hors service et élimination

10.1 Mise hors service

- ▶ Vidanger l'ensemble des solvants et liquides de refroidissement.
- ▶ Arrêter l'instrument et le débrancher de l'alimentation secteur.
- ▶ Nettoyer l'instrument.
- ▶ Retirer tous les tuyaux et câbles de communication de l'appareil.

10.2 Élimination

L'opérateur est chargé d'éliminer correctement l'instrument.

- ▶ Lors de la mise au rebut de l'équipement, respecter les réglementations locales et les exigences légales relatives à l'élimination des déchets.
- ▶ Lors de la mise au rebut, respecter les réglementations relatives à la mise au rebut des matériaux usagés. Matériaux usagés, voir Chapitre 3.4 "Caractéristiques techniques", page 19.

10.3 Renvoi de l'instrument

Veillez contacter le service après-vente BÜCHI Labortechnik AG avant de renvoyer l'instrument.

<https://www.buchi.com/contact>

11 Annexe

11.1 Pièces de rechange et accessoires

Utilisez uniquement des consommables et des pièces détachées d'origine BUCHI pour garantir la bonne performance du système, la fiabilité et la sécurité.



REMARQUE

Toute modification des pièces détachées ou des composants nécessite l'autorisation écrite préalable de BUCHI.

Nous sommes représentés par plus de 100 distributeurs dans le monde.
Pour trouver votre revendeur le plus proche, rendez-vous sur :

www.buchi.com

Quality in your hands
