



NIRMaster™ Essential

Performances FT-NIR de pointe

Contrôle rapide de la qualité et des valeurs nutritives de vos produits alimentaires, de fourrage, de meunerie et de boulangerie. Le NIRMaster est le premier spectromètre au monde à combiner la précision de la technologie de polarisation FT aux exigences du nettoyage relatives aux machines des chaînes de production.



Ash	8.11
Cysteine	2.45
Lysine	3.01

Résultats optimaux

Précision et reproductibilité maximales



Facile d'utilisation

Mesures sur la chaîne de production répondant aux exigences d'hygiène



Fiable

Fonctionnement en continu quelles que soient les conditions de travail

NIRMaster™ Essential: Aperçu des avantages les plus importants



Résultats optimaux

- Résultats hautement reproductibles grâce à la technologie de polarisation à transformée de Fourier NIR (FT-NIR)
- Mesures précises de plusieurs paramètres simultanément
- Exactitude des données grâce à la précision des longueurs d'ondes assurée par le système de laser interne



Facile d'utilisation

- Utilisation de pré-calibrations permettant un gain de temps
- Compatible avec les écrans et claviers industriels standard
- Protection certifiée contre la pénétration de poussière et les projections d'eau (IP54)
- Conception hygiénique facile à nettoyer




Fiable

- Fiabilité maximale des relevés grâce à l'interféromètre à polarisation FT insensible aux vibrations
- Vérification permanente des performances grâce aux contrôles automatisés d'étalons internes
- Fonctionnement en continu grâce au module « Twin Lamps »

Complétez votre gamme de produits



**NIRCal®
Software**
Développement
de l'étalonnage
chimiométrique

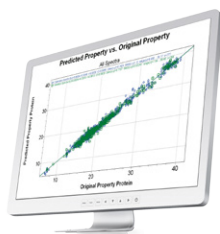

**Quick-start
calibrations**
Fourrage, produits
alimentaires, minoterie
et boulangerie



**KjelMaster
K-375**
Distillation et titration

