



Interface I-300 Pro

Kontrol layar sentuh pusat, pencatatan & pembaganan

Interface I-300 Pro menawarkan layar sentuh 7" untuk mengendalikan dan melihat semua parameter proses secara sekilas. Mode pengoperasian yang canggih, pencatatan dan kemampuan menampilkan grafik meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses rotary evaporation.

Mudah

Kontrol pusat dengan layar sentuh dari seluruh parameter proses, pencatatan, menampilkan grafik, tampilan langsung dan pemberitahuan pada perangkat seluler



Serbaguna

Pemasangan yang fleksibel dan pengoperasian yang mudah



Efisien

Pengoperasian tanpa pengawasan dan proses tersinkron



Interface I-300 Pro

Fitur utama dan keunggulan



Konfigurasi sistem Rotavapor® Anda:
www.buchi.com/Rotavapor





Navigasi intuitif

Panel sentuh tahan air, kenop navigasi yang mudah digunakan oleh pengguna dan tombol stop yang instant.



Distilasi otomatis

Dengan fungsi AutoDest dan sensor buih sample berbusa juga akan didistilasi secara otomatis.



Tampilan grafik

Seluruh parameter proses ditampilkan secara grafis untuk memudahkan pengawasan distilasi.




Pencatatan

Untuk tujuan penelusuran semua parameter proses terus dicatat. Set data dapat dipindahkan ke SD card untuk analisis lebih lanjut.



Kontrol jarak jauh

Pengoperasian interface dari tempat Anda berada berkat pemasangan yang fleksibel pada fume hood dengan holder tambahan.

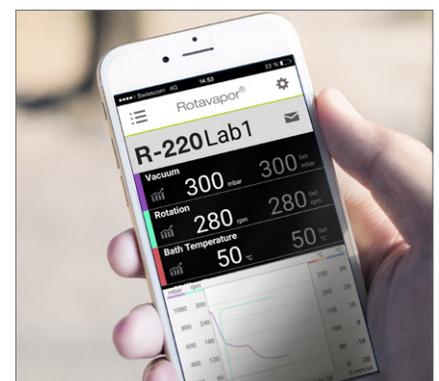


Pemantauan jarak jauh

Aplikasi Rotavapor® R-300 untuk iOS, Android dan Windows menawarkan tampilan langsung dan menampilkan grafik seluruh parameter proses termasuk pemberitahuan.

Pengoperasian berdasarkan metode meminimalisir pengawasan

Hingga kini proses distilasi memerlukan pengawasan tanpa henti untuk menjamin kelancaran pengoperasian. Kini I-300 Pro menawarkan langkah-langkah pengguna tertentu yang secara otomatis akan memandu operator selama proses. Pemberitahuan memberikan peringatan ketika pengoperasian manual diperlukan. Inovasi terbaru BUCHI menghemat waktu Anda dengan tanpa adanya pengawasan.

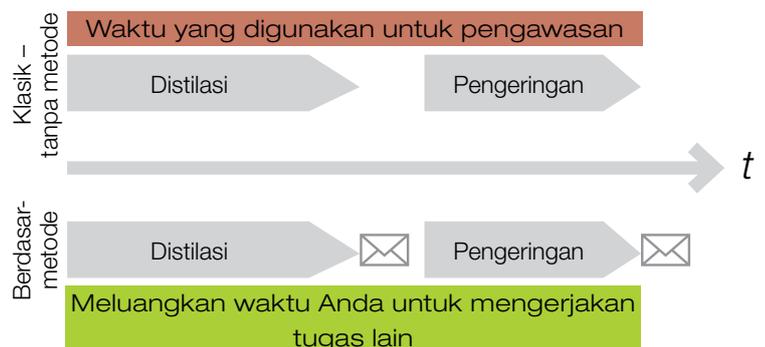

I-300 Pro: Manfaat paling penting untuk Anda



Efisien

- Pengoperasian terpandu dengan metode yang dapat diprogram termasuk pemberitahuan pada perangkat seluler ketika diperlukan operasi manual
- Mode lebih lanjut memungkinkan pengoperasian tanpa pengawasan:
 - Distilasi otomatis dengan sensor AutoDest
 - Sensor buih untuk sampel berbusa
- Pemrosesan tersinkron sempurna berkat control secara terpusat pada rotary evaporator, bath pemanas, pompa vakum dengan kecepatan terkontrol dan recirculating chiller



Mudah

- Integrasi plug & play yang mudah ke dalam sistem Rotavapor® R-300 kapan saja
- Kontrol pusat dengan layar sentuh dan regulasi pada seluruh parameter proses secara sekilas seperti kecepatan rotasi, suhu pemanas/pendingin/uap dan tekanan
- Pemantauan jarak jauh pada perangkat seluler antara lain pemberitahuan, tampilan langsung dan tampilan grafik
- Penelusuran bisa dilakukan berkat pencatatan pada seluruh parameter proses tanpa perangkat lunak tambahan



Serbaguna

- Fleksibilitas interface memungkinkan pemasangan dan pengoperasian yang mudah dan berbagai posisi:
 - Pegangan pada Rotavapor®
 - Pompa vakum
 - Fume hood atau dinding meja lab
- Pengoperasian stand-alone untuk mengontrol suatu sistem vakum

Lengkapi portofolio Anda



**Rotavapor®
R-300**
Rotary evaporation
yang mudah dan
efisien



**Vacuum Pump
V-300**
Sumber vakum
ekonomis dan anti
bising



**Recirculating Chiller
F-305 / F-308 / F-314**
Cara penghematan
air yang efisien pada
pendinginan



**Interface I-300 /
I-300 Pro**
Kontrol pusat
dengan layar sentuh,
pencatatan dan

