




Melting Point M-565 (融点測定装置) 信頼性の高い自動測定

融点および沸点を自動で測定する Melting Point M-565 (融点測定装置) は、プロフェッショナルな品質管理用として設計されています。結晶の熱挙動観察用のカラーディスプレイ、ビデオカメラ、ビデオ再生機能を備え、融点および沸点の測定の結果をビデオ再生することができます。

正確
フェイルセーフ校正機能



高い柔軟性
融点、沸点、上昇融点の測

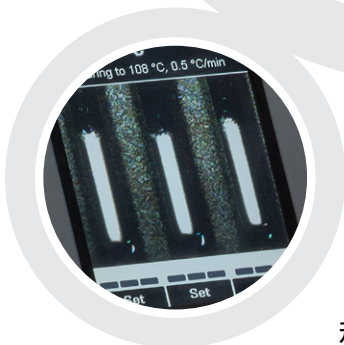

規格に適合
各種公定法に対応



M-565: ひと目でわかる特長



正確性

- ・ 自動測定および校正結果の保存機能を備えたフェイルセーフ校正機能
- ・ 融点および沸点の自動測定
- ・ 非常に正確な温度調節および測定
- ・ Sample Loader M-569 (サンプルローダー) による毛細管への均一な充填と高い再現性



高い柔軟性

- ・ 融点、沸点、上昇融点の測定により、ほぼすべての種類のサンプルをカバー
- ・ 測定が難しいサンプルも、手動と自動の両方の測定結果によるダブルチェック可能
- ・ カラーディスプレイとビデオ記録による、相転移の観察および再生
- ・ メソッドと結果を簡単に管理可能なオプションのPCソフトウェア



規格に適合

- ・ 薬局方 (EP, USP, JP) に対応
- ・ 標準試薬を使用したIQ/OQの実施やGLP/GMP準拠のプリンター出力

あわせてご使用ください



Sample Loader
M-569
キャピラリーの充填を効
率化



Syncore®
Polyvap
複数試料の処理に



Melting Point
Monitor Software
データ管理用ソフトウェア



IQ / OQ
for M-565
用品質管理手順

