



# Rotavapor® R-300

## Evaporación rotatoria cómoda y eficaz

El R-300 responde a las expectativas más elevadas en cuanto a comodidad y versatilidad. Su diseño modular permite la ampliación del Rotavapor® R-300 a un sistema totalmente integrado en el que la interfaz central regula todos los componentes.

### Cómodo

Manija ergonómica, Combi-Clip de manejo sencillo e interacción intuitiva del usuario



### Reproducibile

Control preciso de todos los parámetros



### Ampliable y versátil

Actualice su Rotavapor® R-300 a un sistema totalmente integrado en cualquier momento





# Rotavapor® R-300

Principales características y ventajas



reddot award 2016  
winner



if  
DESIGN  
AWARD  
2016



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2016



Configure su propio sistema Rotavapor®:  
[www.buchi.com/Rotavapor](http://www.buchi.com/Rotavapor)





### Manija ergonómica

Manija ergonómica para cambiar la posición del elevador cómodamente. Disponible en versión electrónica y manual.



### Control directo de la velocidad de rotación

Ajuste inmediato de la velocidad de rotación con la perilla de control, situada de forma intuitiva por si se produce alguna urgencia o incidencia inesperada.



### Combi-clip

El Combi-Clip multifuncional con mecanismo de cierre rápido permite la conexión del matraz evaporador con una mano.



### Pantalla integrada

La temperatura del baño calefactor, la velocidad de rotación y la posición del elevador se muestran en la pantalla integrada en el baño calefactor.



### Interfaz adicional

Controle y regule todos los parámetros de forma cómoda con la Interfaz I-300 o I-300 Pro opcional.




### Módulos de vidrio

Siete módulos de vidrio diferentes permiten una amplia gama de aplicaciones, disolventes y propiedades de muestra.

## Opciones del baño calefactor

Elija entre dos baños calefactores distintos. El B-301, para matraces de 1 L y una temperatura máxima de 95 °C, ofrece un calentamiento rápido. Para matraces de hasta 5 L y 220 °C de temperatura máxima, el B-305 cubre una gama más amplia de aplicaciones.

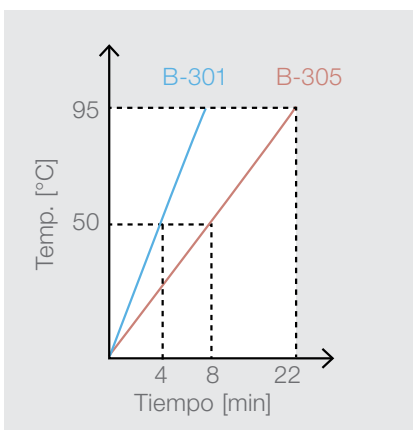

B-301



B-305

4 min a 50 °C

8 min a 50 °C

P<sub>max</sub> 1100 W

P<sub>max</sub> 1300 W

Matraz de 1 L

Matraz de 5 L

T<sub>max</sub> 95 °C

T<sub>max</sub> 220 °C

## R-300: Sus mejores argumentos



### Cómodo

- Extracción cómoda del matraz y el conducto de vapor gracias al Combi-Clip de manejo sencillo
- Fácil manejo gracias al elevador ergonómico eléctrico o manual
- Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación con perillas de control situadas de forma intuitiva



### Ampliable y versátil

- Sencilla ampliación mediante Plug and Play a un sistema totalmente integrado, con una interfaz central, bomba de vacío y refrigerador de recirculación, de acuerdo con sus necesidades
- Posibilidad de elegir entre baño calefactor de 5 L a alta temperatura o de 1 L y calentamiento rápido
- Amplia gama de prácticos accesorios disponible: siete módulos de vidrio distintos, pantalla de seguridad, tapa para el baño calefactor, destilación automática y detección automática de espuma



### Reproducibile

- Control preciso de funcionamiento con indicación digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de rotación y posición del elevador
- Trazabilidad de todos los parámetros, incluido registro de datos y representación gráfica con la Interfaz I-300 Pro opcional
- Aviso inmediato con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con Interfaz I-300 / I-300 Pro)

## Complete su gama



### Interfaz I-300 / I-300 Pro

Control central mediante pantalla táctil, registro y representación gráfica



### Bomba de vacío V-300

La fuente de vacío silenciosa y económica



### Recirculador Chiller F-305 / F-308 / F-314

O modo de refrigeración eficiente e com economia de água



### Multivapor™ P-6 / P-12

Evaporación eficaz para muestras múltiples

