




Interface I-300 Pro

Controle central touch screen, registro e mapeamento

A Interface I-300 Pro oferece uma touch screen de 7" para controle e visualização de todos os parâmetros de processo de uma única vez. Modos de operação sofisticados, capacidades de registro e de mapeamento aumentam a eficiência e a conveniência dos processos de evaporação rotativos.

Prático

Controle central por touch screen de todos os parâmetros de processo, registros, mapeamento, visualização em tempo real e notificações por meio de dispositivos móveis

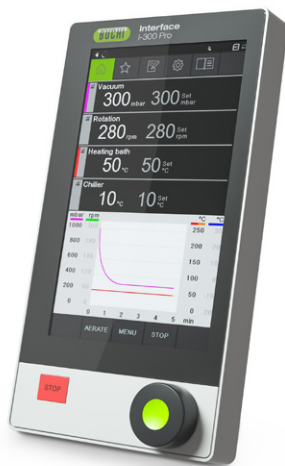

Versátil

Instalação flexível e operação conveniente



Eficiente

Operação sem supervisão e processamento sincronizado



Interface I-300 Pro

Recursos chaves e vantagens



Configure seu sistema individual Rotavapor® :
www.buchi.com/Rotavapor






Navegação intuitiva

Conveniente painel touch à prova d'água, botão de navegação de fácil utilização e botão de parada instantânea.



Destilação automática

Com a função AutoDest e o sensor de espuma mesmo as amostras com formação de espuma serão destiladas automaticamente.

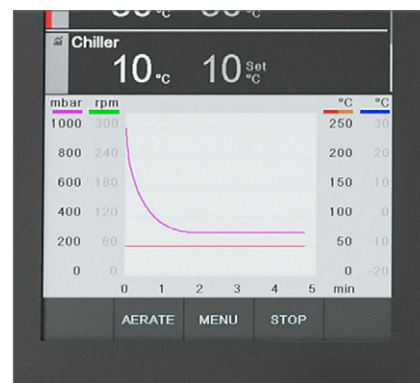

Mapeamento

Todos os parâmetros de processo são exibidos de forma gráfica para facilitar a supervisão da destilação.




Registro

Para fins de rastreabilidade todos os parâmetros de processo são registrados continuamente. O conjunto de dados pode ser exportado em um cartão SD para análise complementar.



Controle remoto

Opere a interface do local que lhe seja mais conveniente graças à instalação flexível do sistema de exaustão com um suporte adicional.

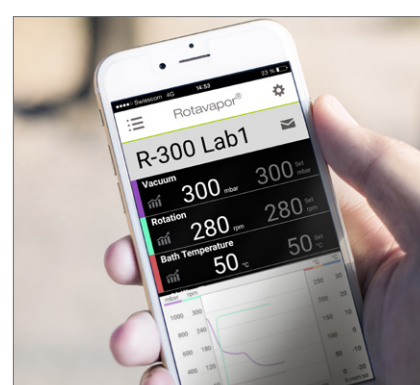


Monitoramento remoto

O Rotavapor® R-300 App para iOS, Android e Window oferece visualização em tempo real de todos os parâmetros de processo incluindo o envio de notificações.

Operação baseada em método minimiza a supervisão

Até então o processo de destilação exigia supervisão regular para garantir a operação adequada. O I-300 Pro oferece agora etapas definidas pelo usuário que automaticamente guiam o operador automaticamente pelo processo. O envio de notificações alerta quando a interação manual se faz necessária.

A mais recente inovação da BUCHI, libera seu tempo eliminando a necessidade de supervisão no local.

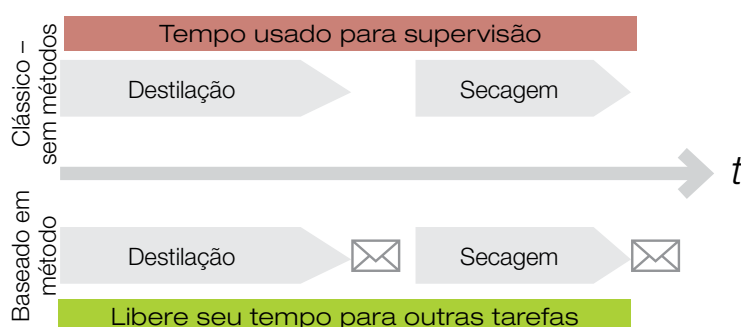

I-300 Pro: Benefícios mais importantes



Eficiente

- Operação guiada com métodos programáveis incluindo envio de notificações por dispositivos móveis quando a interação manual é necessária
- Modos adicionais que permitem a operação sem supervisão:
 - Destilação automática com sensor AutoDest
 - Sensor de espuma para amostras com formação de espuma
- Processamento perfeitamente sincronizado graças ao Rotavapor® controlado centralmente, ao banho de aquecimento, à bomba de vácuo de velocidade controlada e Recirculador Chiller



Prático

- Fácil integração do tipo plug-and-play junto ao sistema Rotavapor® R-300 a qualquer momento
- Controle central por touch screen de todos os parâmetros de processo de uma vez, como velocidade de rotação, temperatura de aquecimento/resfriamento/vapor e pressão
- Monitoramento remoto por dispositivos móveis, incluindo envio de notificações, visualização em tempo real e mapeamento
- Rastreabilidade graças ao registro de todos os parâmetros de processo sem software adicional



Versátil

- A flexibilidade da interface permite instalação e operação conveniente de múltiplas posições:
 - Alça Rotavapor®
 - Bomba de Vácuo
 - Capela ou bancada de laboratório
- Operação independente para controlar localmente o sistema de vácuo

Complete o seu portfólio



**Rotavapor®
R-300**
Evaporação rotativa
prática e eficiente



**Bomba de Vácuo
V-300**
A fonte de vácuo
econômica e
silenciosa



**Recirculador Chiller
F-305 / F-308 / F-314**
O modo de
refrigeração eficiente e
com economia de água



**Interface I-300 /
I-300 Pro**
Controle central por
touch screen, registro
e mapeamento

