




## NIRMaster™ Essential (傅立叶变换近红外光谱仪) 高等级防护的傅里叶变换近红外光谱仪

快速控制饲料、宠物食品、面粉产品和焙烤食品的质量和营养因子。NIRMaster (傅立叶变换近红外光谱仪) 是世界上第一台融合了傅里叶变换技术的精确度与生产线机械清洁要求的光谱仪。

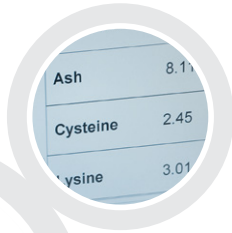

Ash	8.11
Cysteine	2.45
Lysine	3.01

优良的结果  
最大精确度和再现性



简单易用  
符合卫生要求的设计, 可在生产线上进行测量



可靠  
在各种工作状况下持续运行

## NIRMaster™ Essential: 您最重要的得益



### 优良的结果

- 通过偏振干涉傅里叶变换近红外光 (FT-NIR) 技术得到高度可再现的结果
- 同时精确测量多种参数
- 通过内部激光系统确保极其精确的波长, 得到准确的数据



### 简单易用

- 高效、省时、启动快速的校准
- 兼容标准工业监视器和键盘
- 经过认证的防尘防水保护 (IP54)
- 容易清洁的卫生设计




### 可靠

- 通过防振傅里叶变换偏振干涉仪得到最可靠的读数
- 通过自动内部标准检查, 确保永久的性能验证
- 双灯保护措施确保持续运行

## 完善您的组合



NIRCal®  
Software  
化学计量学校准优化

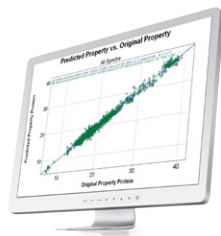

Quick-start  
calibrations  
输送、食品、碾磨和烘培



KjelMaster  
K-375  
蒸汽蒸馏和滴定

